

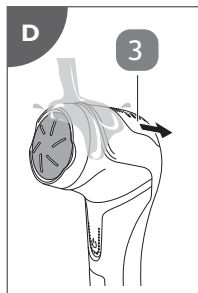
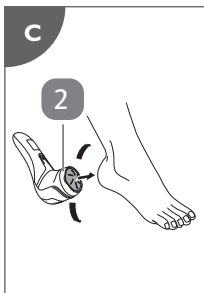


Silk'n®

FRESHPEDI

FTC03

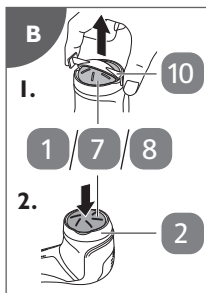

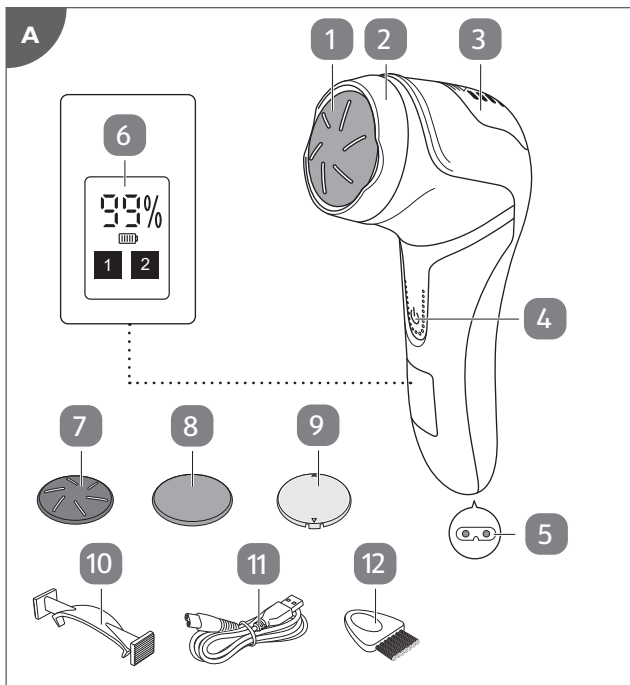

Prawa autorskie 2024 © Silkn Beauty Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacja prawna

Invention Works B.V. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy efektywności, bezpieczeństwa użytkowania lub zdolności produkcyjnych. Informacje udostępnione przez Invention Works B.V. zostają uznane za poprawne i wiarygodne w dniu ich opublikowania. Jednak Invention Works B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Invention Works B.V. nie przyznaje żadnej licencji dorozumianej, wynikającej z patentu lub podlegającej przepisom prawa patentowego.

Żadnej z części niniejszego dokumentu nie wolno w żadnej formie lub elektronicznie czy mechanicznie kopiować lub przekazywać w jakichkolwiek celach bez wyraźnej pisemnej zgody Invention Works B.V.

Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Silkn Beauty Ltd. dysponuje patentami oraz zgłoszeniami patentowymi, znakami towarowymi, prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej, które są przedmiotem tego dokumentu. Udostępnienie niniejszego dokumentu nie oznacza przekazania licencji na patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, o ile nie jest to wyraźnie uregulowane w formie pisemnej umowy przez Silkn Beauty Ltd. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Silk'n i logo Silk'n są zarejestrowanymi znakami towarowymi Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Holandia
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Spis treści

1	Zawartość opakowania/części urządzenia	5
2	Informacje ogólne	5
2.1	Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej	5
2.2	Objaśnienie symboli	5
3	Bezpieczeństwo	6
3.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	6
3.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	6
4	Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania	11
5	Ładowanie	11
6	Obsługa	12
6.1	Zakładanie lub wymiana tarcz do usuwania zrogowaciałego naskórka	12
6.2	Rozpoczynanie i kończenie zabiegu	13
7	Czyszczenie	13
8	Przechowywanie	14
9	Rozwiązywanie problemów	14
10	Dane techniczne	15
11	Utylizacja	15
11.1	Utylizacja opakowania	15
11.2	Utylizacja produktu	15
12	Informacje gwarancyjne	16
13	Obsługa klienta	17

I Zawartość opakowania/części urządzenia

- | | |
|---|---|
| 1 Tarcza do usuwania zrogowaciałego naskórka* (średnia) | 7 Tarcza do usuwania zrogowaciałego naskórka (gruba) |
| 2 Głowica pilnika (z wałkiem) | 8 Tarcza do usuwania zrogowaciałego naskórka (drobna) |
| 3 Pokrywa komory pyłu | 9 Osłona |
| 4 Przycisk obsługi (⏻) | 10 Ściągacz do tarcz |
| 5 Gniazdo ładowania | 11 Kabel USB |
| 6 Wyświetlacz | 12 Szczotka do czyszczenia |

*Już zamocowana na głowicy do pilnika.

2 Informacje ogólne

2.1 Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej



Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy urządzenia do usuwania zrogowaciałej skóry FreshPedi (zwanego dalej „produktem”). Zawiera ona ważne informacje potrzebne do rozpoczęcia użytkowania i obsługi.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu

należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności instrukcji bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji obsługi może doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu. Instrukcja obsługi opiera się na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej. Należy również przestrzegać wytycznych i przepisów krajowych. Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi w celu późniejszego wykorzystania. Przekazując produkt osobie trzeciej, koniecznie należy dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

2.2 Objaśnienie symboli

Poniższe symbole i zwroty ostrzegawcze są używane w niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie oraz na opakowaniu.

OSTRZEŻENIE!

Symbol/zwrot ostrzegawczy wskazujący na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które – w przypadku jego zignorowania – może doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet do śmierci.

WSKAZÓWKA!

Zwrot ostrzegawczy ostrzegający przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ten symbol ostrzegawczy wskazuje na przydatne informacje dodatkowe dotyczące obsługi i użytkowania.



Zapoznać się z instrukcją obsługi.



Deklaracja zgodności: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie właściwe przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IPX7

Produkt jest chroniony po zanurzeniu w wodzie na głębokość 1 m przez maksymalnie 30 minut.

3 Bezpieczeństwo

3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do usuwania zrogowaciałego naskórka stóp. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nie zastosowania komercyjnego. Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Każdy inny sposób wykorzystania produktu uznaje się za niezgodny z przeznaczeniem i może doprowadzić do strat materialnych lub stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe wskutek użytkowania produktu w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

3.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Produkt może być używany wyłącznie z dołączonym kablem USB.
- Kabel USB produktu należy podłączać wyłącznie do odpowiedniego zasilacza (zasilacz SELV z certyfikatem IEC/EN 60335),

który z kolei jest podłączony do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego, aby można go było szybko odłączyć od sieci w przypadku awarii.

- Nie używać produktu, jeśli produkt lub kabel USB jest uszkodzony.
- Nie otwierać obudowy, a naprawę zlecać specjalistom. W tym celu należy zwrócić się do działu obsługi klienta. W przypadku naprawy przeprowadzonej we własnym zakresie, nieprawidłowego podłączenia lub nieodpowiedniej obsługi wyklucza się roszczenia gwarancyjne.
- Do naprawy urządzenia wolno stosować tylko części odpowiadające jego pierwotnym danym. W produkcie znajdują się części elektryczne i mechaniczne nieodchowne do bezpiecznego użytkowania.
- Kabel USB należy trzymać z dala od wody i innych płynów. Nie jest on wodoszczelny.
- Nie zanurzać produktu w wodzie (maks. głębokość 1 m) na dłużej niż 30 minut i nie trzymać go pod bieżącą wodą dłużej niż 30 minut.
- Zawsze wyłączać produkt, gdy nie jest używany, w celu wyczyszczenia lub gdy wystąpiła usterka. Zawsze odłączać kabel USB od zasilania, gdy produkt nie jest ładowany.

- Nigdy nie dotykać kabla USB wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do obudowy.
- Trzymać produkt i wszystkie jego części z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Kabel USB należy prowadzić w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko potknięcia.
- Nie wyciągać kabla USB z zasilacza, ciągnąc za przewód, zawsze chwytać za wtyczkę kabla.
- Nie zaginać kabla USB i nie prowadzić go przez ostre krawędzie.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.



OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

- Dzieci poniżej 8. roku życia należy trzymać z dala od produktu i kabla USB.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się opakowaniem z tworzywa sztucznego. Mogłyby się podczas zabawy w nią zaplątać i udusić.
- Nie należy używać produktu, dopóki tarcza do usuwania zrogowaciałego naskórka nie zostanie prawidłowo zamocowana.
- Produkt należy stosować wyłącznie do usuwania zrogowaciałego naskórka stóp. Nie stosować na innych częściach ciała oraz na miękkiej lub cienkiej skórze.
- Używać produktu tylko do pielęgnacji skóry na sucho (nie używać dodatków, takich jak olejki lub balsamy).
- Poszczególne obszary skóry należy poddawać zabiegowi przez maksymalnie 2 do 3 sekund na raz.
- Nie stosować produktu bezpośrednio na lub w pobliżu otwartych ran i obszarów skóry objętych stanem zapalnym lub w celu usunięcia brodawek.
- Jeśli wystąpi ból lub podrażnienie, należy natychmiast przerwać stosowanie produktu.
- Skonsultować się z lekarzem, jeśli nie ma się pewności, czy produkt jest odpowiedni dla użytkownika (na przykład, jeśli użytkownik cierpi na choroby skóry lub cukrzycę, jest w ciąży lub nosi rozrusznik serca).

- Ze względów higienicznych produkt powinien być używany tylko przez jedną osobę.
- Produkt należy trzymać z dala od włosów, peruk i innych długich, ruchomych przedmiotów, takich jak sznurowadła, nici, włókna tekstylne itp.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania z baterii może wyciekać płyn - należy unikać kontaktu z nim. Płyn wyciekający z baterii może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- W przypadku kontaktu skóry, oczu lub błon śluzowych z płynem z baterii należy natychmiast przemyć i spłukać dotknięte obszary czystą wodą. W razie potrzeby proszę skonsultować się z lekarzem.
- Baterii nie wolno demontować, zwierać ani wrzucać do ognia.

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nie narażać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury.
- Nie należy umieszczać produktu na krawędzi powierzchni, aby zapobiec jego upadkowi.
- Produkt należy używać wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami.
- Nigdy nie napełniać obudowy produktu płynami.

4 Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nieostrożne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innym ostrym przedmiotem może spowodować uszkodzenie produktu. Opakowanie należy otwierać bardzo ostrożnie.
1. Wyjąć produkt z opakowania.
 2. Sprawdzić, czy zawartość opakowania jest kompletna (patrz **rys. A**).
 3. Sprawdzić, czy produkt lub jego poszczególne części nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie należy korzystać z produktu. Prosimy zwrócić się do działem obsługi klienta.

5 Ładowanie



OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Nie ładować produktu, gdy jest mokry. Przed rozpoczęciem ładowania upewnić się, że produkt jest suchy.
- Produkt może być ładowany wyłącznie dołączonym kablem USB.
- Produkt ładować wyłącznie w temperaturze od 0 do 40 °C.
- Zawsze odłączać produkt od zasilania po zakończeniu ładowania.



- Należy w pełni naładować produkt przed pierwszym użyciem i gdy poziom naładowania baterii jest niski.
- Pozostały poziom naładowania baterii jest wskazywany na wyświetlaczu **6** (w %). Naładować produkt, gdy poziom naładowania baterii jest niski.
- Podczas ładowania nie wolno używać produktu.

1. Podłączyć mniejszą końcówkę kabla USB **11** do gniazda ładowania **5** produktu.
2. Aby naładować urządzenie, podłączyć większą końcówkę kabla USB do gniazda USB odpowiedniego źródła zasilania USB (np. zasilacza USB).
Proces ładowania rozpocznie się automatycznie. Aktualny poziom naładowania baterii jest wyświetlany na wyświetlaczu (w %).
3. Po zakończeniu ładowania odłączyć kabel USB od gniazda ładowania i źródła zasilania USB.

6 Obsługa



- Przed pierwszym zastosowaniem produktu na danym obszarze stóp należy wykonać test tolerancji skóry przez maksymalnie 3 sekundy. Zabieg należy rozpocząć tylko wtedy, gdy nie występuje zauważalna reakcja skóry.
- Nowe tarcze do usuwania zrogowaciałego naskórka można kupić na naszej stronie internetowej pod adresem „www.silkn.eu”.

6.1 Zakładanie lub wymiana tarcz do usuwania zrogowaciałego naskórka

Produkt zawiera 3 tarcze do usuwania zrogowaciałego naskórka **8** / **1** / **7** (drobną, średnią i grubą). Zacząć od drobnej tarczy do usuwania zrogowaciałego naskórka, dopóki nie upewni się, że zabieg jest dobrze tolerowany.

1. Zdjąć osłonę **9**, jeśli jest umieszczona na produkcie.
2. Wyjąć zamontowaną tarczę z produktu.

W razie potrzeby zaczepić ściągacz do tarcz **10** na tarczy, a następnie pociągnąć go do góry, aby odzepić tarczę (patrz krok 1 na **rys. B**).

3. Delikatnie wcisnąć wybraną tarczę na wałek głowicy pilnika **2** (patrz krok 2 na **rys. B**).

Gdy tarcza się zatrzaśnie, słychać będzie kliknięcie.

6.2 Rozpoczynanie i kończenie zabiegu

1. Upewnić się, że stopy są czyste i całkowicie suche.
2. Nacisnąć jeden raz przycisk obsługi (⏻) **4**.
Produkt jest teraz włączony i ustawiony na niską prędkość. Na wyświetlaczu **6** pojawi się symbol „1”.
3. Nacisnąć ponownie przycisk obsługi (⏻), aby zwiększyć poziom prędkości.
Produkt jest teraz ustawiony na wysoką prędkość. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „2”.
4. Prowadzić głowicę pilnika **2** na obszarach skóry, które mają zostać poddane zabiegowi. Wywierać przy tym lekki nacisk i używać głowicy pilnika w jednym punkcie skóry przez maksymalnie 2 do 3 sekund. Następnie sprawdzić rezultat (patrz **rys. C**).
Pył powstający podczas zabiegu jest zasysany do komory pyłu za głowicą pilnika.
5. Po zakończeniu zabiegu nacisnąć przycisk obsługi (⏻) po raz trzeci, aby wyłączyć produkt.

7 Czyszczenie

OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRADEM!

- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć produkt od źródła zasilania.

WSKAZÓWK! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, szczotek ze szczeciną metalową, ani ostrych przedmiotów do czyszczenia lub przedmiotów wykonanych z metalu, takich jak noże, twarde szpachle itp.

Produkt należy czyścić po każdym użyciu.

1. Upewnić się, że produkt jest wyłączony i nie znajduje się w trybie ładowania.

2. Odsunąć pokrywę komory pyłu **3** i usunąć zebrany wewnątrz pył (patrz **rys. D**).
Jeśli to konieczne, użyć do tego celu szczotki do czyszczenia **12**.
3. Przepłukać tarczę do usuwania zrogowaciałego naskórka **1**/**7**/**8**, komorę pyłu i obudowę produktu pod bieżącą wodą (patrz **rys. D**).
Aby czyszczenie było bardziej efektywne, można włączyć produkt na kilka sekund.
4. Po zakończeniu czyszczenia należy wysuszyć wszystkie części produktu.
5. Przed ponownym użyciem produktu należy założyć pokrywę komory pyłu.

8 Przechowywanie

Do przechowywania produktu wszystkie części powinny być zupełnie suche.

- Należy przechowywać wszystkie części w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Założyć osłonę **9** w celu ochrony tarczy do usuwania zrogowaciałego naskórka **1**/**7**/**8** podczas przechowywania.

9 Rozwiązywanie problemów

Problemy mogą być spowodowane nieznacznymi usterkami, które można samodzielnie usunąć. W tym celu należy przestrzegać instrukcji z poniższej tabeli. Jeśli problem nie zostanie w ten sposób rozwiązany, należy zwrócić się do Działu Obsługi Klienta. Nie wolno samodzielnie naprawiać produktu.

Usterka	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Nie można włączyć produktu.	Upewnić się, że produkt jest prawidłowo naładowany (patrz rozdział „Ładowanie”).
Proces ładowania nie rozpoczyna się.	Upewnić się, że kabel USB 11 jest prawidłowo podłączony do produktu i gniazda ładowania USB odpowiedniego źródła zasilania USB.

10 Dane techniczne

Model:	FTC03
Napięcie:	3,7 V DC
Zasilanie:	6 W
Pojemność akumulatora:	2000 mAh (litowy)
Ustawienia prędkości:	2 (niska/wysoka)
Prędkość obrotowa:	1900 obr./min (niska prędkość) 2200 obr./min (wysoka prędkość)
Czas ładowania:	2,5–3 godziny
Rodzaj ochrony:	IPX7 (ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie na głębokość 1 m przez maksymalnie 30 minut).
Czas użytkowania:	Ok. 150 minut przy pełnym naładowaniu
Wymiary:	165 × 76 × 50 mm

11 Utylizacja

11.1 Utylizacja opakowania



Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego kontenera na odpady. Tekturę i karton należy zutylizować razem z makulaturą, folię razem z tworzywem sztucznym.

11.2 Utylizacja produktu

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami selektywnej zbiórki surowców wtórnych)



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym **zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.** Elektroodpady nie mogą

być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga **uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprężce niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.**

Ten symbol oznacza, że produktu nie można wyrzucać z pozostałymi odpadami domowymi (2012/19/UE).

Baterii i akumulatorów nie można wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!



Użytkownik końcowy jest ustawowo zobowiązany do przekazania wszystkich baterii i akumulatorów – niezależnie od tego, czy zawierają one substancje niebezpieczne*, czy nie – do punktu zbiórki w gminie lub do sprzedawcy, aby można je było zutylizować w sposób

przyjazny dla środowiska.

Należy oddać kompletny produkt (w tym akumulator) do punktu zbiórki i upewnić się, że akumulator jest rozładowany!

*oznaczono za pomocą: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

12 Informacje gwarancyjne

Ten produkt jest objęty 2-letnią gwarancją zgodnie z regulacjami i przepisami europejskimi. Zakres gwarancji tego produktu jest ograniczony do usterek technicznych spowodowanych wadliwym procesem produkcji. W przypadku chęci wniesienia roszczenia z tytułu gwarancji należy zasięgnąć wskazówek w naszym Dziale Obsługi Klienta. Być może problem może być rozwiązany bez odsyłania produktu do sklepu czy Centrum Serwisowego. Nasz Dział Obsługi Klienta zawsze chętnie służy pomocą!

I3 Obsługa klienta

Dalsze informacje o produktach Silk'n dostępne są na stronie regionalnej Silk'n: www.silkn.eu. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, potrzebna jest naprawa lub nasza pomoc, prosimy zwrócić się do najbliższego Centrum Serwisowego Silk'n. Ten podręcznik użytkownika można pobrać również ze strony www.silkn.eu w formacie PDF.

Numer Serwisu: +31(0)180-330550

E-mail: info@silkn.eu

2402_007_PL



Silk'n®

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam
The Netherlands

www.silkn.eu • info@silkn.eu



© 2024 Silk'n Beauty Ltd. All rights reserved. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd.