

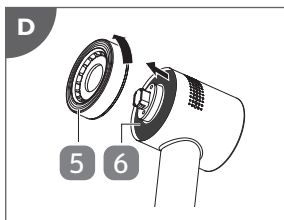
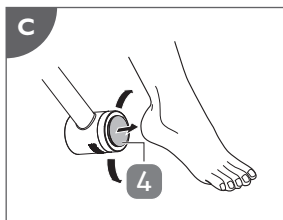


# Silk'n®

## VACUPEDI

### NV8615D

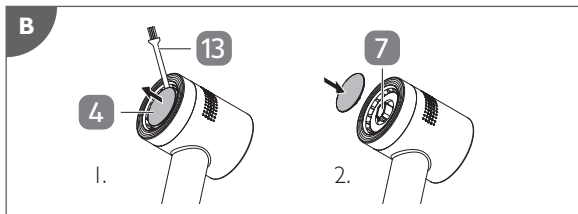

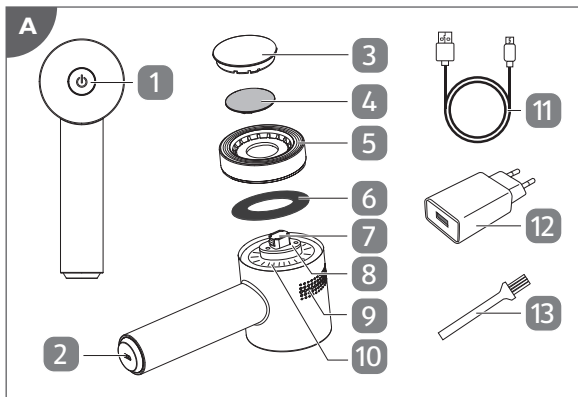

## Informacja prawna

Invention Works B.V. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy efektywności, bezpieczeństwa użytkowania lub zdolności produkcyjnych. Informacje udostępnione przez Invention Works B.V. zostają uznane za poprawne i wiarygodne w dniu ich opublikowania. Jednak Invention Works B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Invention Works B.V. nie przyznaje żadnej licencji dorozumianej, wynikającej z patentu lub podlegającej przepisom prawa patentowego.

Żadnej z części niniejszego dokumentu nie wolno w żadnej formie lub elektronicznie czy mechanicznie kopiować lub przekazywać w jakichkolwiek celach bez wyraźnej pisemnej zgody Invention Works B.V.

Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Silkn Beauty Ltd. dysponuje patentami oraz zgłoszeniami patentowymi, znakami towarowymi, prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej, które są przedmiotem tego dokumentu. Udostępnienie niniejszego dokumentu nie oznacza przekazania licencji na patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, o ile nie jest to wyraźnie uregulowane w formie pisemnej umowy przez Silkn Beauty Ltd. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Silk'n i logo Silk'n są zarejestrowanymi znakami towarowymi Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Holandia

[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) – [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Zawartość opakowania/części urządzenia</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Informacje ogólne</b>	<b>5</b>
2.1	Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej	5
2.2	Objaśnienie symboli	6
<b>3</b>	<b>Bezpieczeństwo</b>	<b>7</b>
3.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	7
3.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	8
<b>4</b>	<b>Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>Ładowanie</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Obsługa</b>	<b>14</b>
6.1	Zakładanie lub wymiana tarcz	15
6.2	Rozpoczynanie i kończenie zabiegu	15
<b>7</b>	<b>Czyszczenie</b>	<b>16</b>
<b>8</b>	<b>Przechowywanie</b>	<b>17</b>
<b>9</b>	<b>Rozwiązywanie problemów</b>	<b>17</b>
<b>10</b>	<b>Dane techniczne</b>	<b>18</b>
<b>11</b>	<b>Utylizacja</b>	<b>19</b>
11.1	Utylizacja opakowania	19
11.2	Utylizacja produktu	20
<b>12</b>	<b>Informacje gwarancyjne</b>	<b>21</b>
<b>13</b>	<b>Obsługa klienta</b>	<b>21</b>

# I Zawartość opakowania/części urządzenia

- |   |   |    |                         |
|---|---|----|-------------------------|
| 1 | Przycisk sterowania (⏻)   | 7  | Watek                   |
| 2 | Gniazdo ładowania   | 8  | Diody LED               |
| 3 | Osłona  | 9  | Otwory wentylacyjne     |
| 4 | Tarcza do usuwania zrogowiałej skóry (drobno-/średnio-/gruboziarnista), 3 × * | 10 | Komora pyłu             |
| 5 | Pierścień mocujący  | 11 | Kabel USB               |
| 6 | Filtr, 3 × *  | 12 | Zasilacz USB            |
|   |   | 13 | Szczotka do czyszczenia |

\* Jedna część jest już zamontowana w produkcie.

## 2 Informacje ogólne

### 2.1 Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej



Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia do usuwania zrogowiałej skóry VacuPedi (zwanego dalej „produktem”). Zawiera ona ważne informacje potrzebne do rozpoczęcia

użytkowania i obsługi.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności instrukcji bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji obsługi może doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu.

Instrukcja obsługi opiera się na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej. Należy również przestrzegać wytycznych i przepisów krajowych. Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi w celu późniejszego wykorzystania. Przekazując produkt osobie trzeciej, koniecznie należy dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

## 2.2 Objaśnienie symboli

Poniższe symbole i zwroty ostrzegawcze są używane w niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie, zasilaczu USB oraz na opakowaniu.



### OSTRZEŻENIE!

Symbol/zwrot ostrzegawczy wskazujący na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które – w przypadku jego zignorowania – może doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet do śmierci.

### WSKAZÓWKA!

Zwrot ostrzegawczy ostrzegający przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ten symbol ostrzegawczy przekazuje przydatne informacje dodatkowe na temat użytkownika.



Należy zapoznać się z instrukcją obsługi.



Deklaracja zgodności: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie właściwe przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Ten symbol oznacza urządzenia elektryczne klasy ochrony II (zasilacz USB).



Urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone jedynie do użytkowania w gospodarstwie domowym (w suchych pomieszczeniach).



Ten symbol wskazuje napięcie i natężenie znamionowe dla prądu stałego.



Międzynarodowe oznaczenie sprawności wskazuje, że zasilanie spełnia wymagania poziomu VI.



Zasilacz USB jest wyposażony w transformator odporny na zwarcie.



Zasilacz USB jest wyposażony w zasilacz impulsowy.

**IP20**

Zasilacz USB jest zabezpieczony przed ciałami stałymi o wielkości do 12 mm.

**ta**

Temperatura otoczenia (zasilacz USB).

## 3 Bezpieczeństwo


### 3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do usuwania zrogowaciałego naskórka stóp. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nie zastosowania komercyjnego. Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Każdy inny sposób wykorzystania produktu uznaje się za niezgodny z przeznaczeniem i może doprowadzić do strat materialnych lub stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe wskutek użytkowania produktu w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

### 3.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



#### OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

-  Produkt, kabel USB i zasilacz USB należy przechowywać z dala od wody i innych cieczy. Nie używać go w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych pojemników napełnionych wodą. Elementy nie są wodoodporne.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Produkt podłączać tylko wtedy, gdy napięcie sieciowe gniazda odpowiada danym na tabliczce znamionowej zasilacza USB.
- Zasilacz USB podłączać wyłącznie do łatwo dostępnego gniazdka, aby w razie awarii można go było szybko odłączyć od sieci elektrycznej.
- Produkt może być używany wyłącznie z dołączonym zasilaczem USB.
- Nie należy używać produktu, kabla USB ani zasilacza USB, jeśli są one



uszkodzone lub wadliwe. Uszkodzone lub wadliwe części muszą zostać wymienione przez producenta lub serwis klienta, aby uniknąć ryzyka.

- Nie otwierać obudowy i nie wkładać do niej żadnych przedmiotów.
- Zawsze wyłączać produkt, gdy nie jest używany, w celu wyczyszczenia lub gdy wystąpiła usterka. Zawsze odłączać kabel USB i zasilacz USB, gdy produkt nie jest ładowany.
- Nigdy nie dotykać kabla USB ani zasilacza USB wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Nie odłączać zasilacza USB od gniazdka za kabel USB, lecz zawsze chwytać za wtyczkę. Nigdy nie transportować, nie ciągnąć ani nie przenosić produktu za kabel USB.
- Przechowywać produkt i zasilacz USB z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Kabel USB należy poprowadzić w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko potknięcia.

- Nie załamywać kabla USB ani nie owijać go wokół produktu. Nie prowadzić kabla USB przez ostre krawędzie.



## **OSTRZEŻENIE! RYZIKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!**

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci poniżej 8. roku życia należy trzymać z dala od produktu, kabla USB i zasilacza USB.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się opakowaniem z tworzywa

sztucznego. Mogłyby się podczas zabawy w nią zaplątać i udusić.

- Produkt należy stosować wyłącznie do stóp w celu usuwania zrogowaciałej skóry. Nie stosować na innych częściach ciała oraz na miękkiej lub cienkiej skórze.
- Używać produktu tylko do pielęgnacji skóry na sucho (nie używać dodatków, takich jak olejki lub balsamy).
- Poszczególne obszary skóry należy poddawać zabiegowi przez maksymalnie 2 do 3 sekund na raz.
- Nie stosować produktu bezpośrednio na lub w pobliżu otwartych ran i obszarów skóry objętych stanem zapalnym lub w celu usunięcia brodawek.
- Jeśli wystąpi ból lub podrażnienie, należy natychmiast przerwać stosowanie produktu.
- Skonsultować się z lekarzem, jeśli nie ma się pewności, czy produkt jest odpowiedni dla użytkownika (na przy-

kład, jeśli użytkownik cierpi na choroby skóry lub cukrzycę, jest w ciąży lub nosi rozrusznik serca).

- Ze względów higienicznych produkt powinien być używany tylko przez jedną osobę.
- Produkt należy trzymać z dala od włosów, peruk i innych długich, elastycznych przedmiotów, takich jak sznurowadła, nici, włókna tekstylne itp.
- Produkt ładować w temperaturze od 0 do 40 °C.

## **WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!**

- Unikać pozostawiania produktu w bezpośrednim świetle słonecznym i nigdy nie narażać go na działanie ekstremalnie wysokich temperatur.
- Nie należy umieszczać produktu na krawędzi powierzchni, aby zapobiec jego upadkowi.
- Produkt należy używać wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami.

- Nigdy nie napełniać obudowy produktu płynami.
- Aby uniknąć przegrzania, nie zakrywać otworów wentylacyjnych podczas pracy.

#### **4 Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania**

### **WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!**

- Nieostrożne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innym ostrym przedmiotem może spowodować uszkodzenie produktu. Opakowanie należy otwierać bardzo ostrożnie.
1. Wyjąć produkt z opakowania.
  2. Sprawdzić, czy zawartość opakowania jest kompletna (patrz **rys. A**).
  3. Sprawdzić, czy produkt lub jego poszczególne części nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie należy korzystać z produktu. Prosimy zwrócić się do działem obsługi klienta.

## 5 Ładowanie



- Należy w pełni naładować produkt przed pierwszym użyciem i gdy poziom naładowania baterii jest niski.
- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, diody LED zaczynają migać na czerwono podczas pracy. Naładować produkt.
- Pełne ładowanie trwa około 2,5 godziny.
- Produkt nie może być używany podczas ładowania.

1. Podłączyć mniejszą końcówkę kabla USB **(11)** do gniazda ładowania **(2)**.
2. Podłączyć większą końcówkę kabla USB do gniazda USB zasilacza USB **(12)**. W celu naładowania kabel USB można również podłączyć do kompatybilnego źródła zasilania USB (np. do portu USB komputera).
3. Podłączyć zasilacz USB do gniazda zasilania, aby naładować urządzenie. Podczas ładowania diody LED **(8)** zaczynają powoli migać na niebiesko.
4. Gdy produkt jest w pełni naładowany, diody LED świecą ciągle na niebiesko. Odłączyć zasilacz USB od gniazda i odłączyć kabel USB od produktu.

## 6 Obsługa



- Przed pierwszym użyciem produktu wyczyścić go zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”.
- Przed pierwszym użyciem na stopach należy sprawdzić tolerancję skóry przez maksymalnie 3 sekundy w wybranym punkcie na stopie. Zabieg należy rozpocząć tylko wtedy, gdy nie występują żadne skutki uboczne.

## 6.1 Zakładanie lub wymiana tarcz

Produkt zawiera 3 tarcze (4): Drobno-/średnio-/gruboziarnistą. W przypadku szczególnie szorstkiej skóry zalecamy rozpoczęcie od tarczy gruboziarnistej.

1. Upewnić się, że produkt jest wyłączony.
2. Zdjąć osłonę (3), jeśli jest umieszczona na produkcie.
3. Wyjąć zamontowaną tarczę z produktu. W razie potrzeby użyć do wyjmowania uchwytu szczotki do czyszczenia (13), jako przyrządu pomocniczego (patrz krok 1 na **rys. B**).
4. Założyć wybraną tarczę na wałek (7) (patrz krok 2 na **rys. B**).  
Gdy tarcza się zatrzaśnie, słychać będzie dźwięk kliknięcia.

## 6.2 Rozpoczynanie i kończenie zabiegu

1. Upewnić się, że stopy są czyste i całkowicie suche.
2. Nacisnąć jeden raz przycisk sterowania (⏻) (1).  
Produkt jest teraz włączony i ustawiony na niską prędkość. Diody LED (8) świecą na niebiesko.
3. Nacisnąć ponownie przycisk sterowania (⏻), aby zwiększyć ustawienie prędkości.  
Produkt jest teraz włączony i ustawiony na wysoką prędkość. Diody LED migają na niebiesko.
4. Prowadzić obracającą się tarczę (4) na obszarach skóry, które mają zostać poddane zabiegowi. Wywierać przy tym lekki nacisk i używać tarczy w jednym punkcie skóry przez maksymalnie dwie do trzech sekund. Następnie sprawdzić rezultat (patrz **rys. C**).  
Aby uniknąć przegrzania, nie zakrywać otworów wentylacyjnych (9) podczas pracy.  
Pył powstający podczas zabiegu jest zasysany do komory pyłu (10).
5. Po zakończeniu zabiegu nacisnąć przycisk sterowania (⏻) po raz trzeci, aby wyłączyć produkt. Diody LED również gasną.

## 7 Czyszczenie

### WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Do czyszczenia nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, szczotek ze szczecinią metalową i ostrych przedmiotów ani przedmiotów wykonanych z metalu, takich jak noże, twarde szpachle itp.

Produkt należy czyścić po każdym użyciu.

1. Wyjąć zamontowaną tarczę **4** z produktu. W razie potrzeby użyć do wyjmowania uchwyty szczotki do czyszczenia **13**, jako przyrządu pomocniczego (patrz krok 1 na **rys. B**).
2. Obrócić pierścień mocujący **5** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć go z produktu (patrz **rys. D**).
3. Wyjąć filtr **6** z komory pyłu **10** (patrz **rys. D**).
4. Prawidłowo wyczyścić poniższe części:

**Jednostka główna:** przetrzeć ją wilgotną szmatką. Następnie wytrzeć ją kompletnie do sucha suchą szmatką.

**Komora pyłu i tarcze:** aby usunąć nagromadzony pył, użyć szczotki do czyszczenia.

**Filtr, pierścień mocujący i osłona **3**:** umyć je pod bieżącą wodą. Wytrzeć pierścień mocujący i osłonę do sucha suchą szmatką, a filtr pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Jeśli filtr zawiera zbyt dużo pyłu, należy go wymienić. Jeśli tarcza jest zużyta, należy ją wymienić.



5. Po wyczyszczeniu ponownie zamontować filtr, pierścien mocujący, tarczę i osłonę. Należy pamiętać, że przed ponownym montażem wszystkie części muszą być całkowicie suche.



Nowe tarcze i filtry można zakupić na naszej stronie internetowej pod adresem „www.silkn.eu”.

## 8 Przechowywanie

Do przechowywania produktu wszystkie części powinny być zupełnie suche.

- Należy przechowywać wszystkie części w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Założyć osłonę **3**, aby zabezpieczyć tarczę **4** na czas przechowywania.

## 9 Rozwiązywanie problemów

Problemy mogą być spowodowane nieznacznymi usterkami, które można samodzielnie usunąć. W tym celu należy przestrzegać instrukcji z poniższej tabeli. Jeśli problem nie zostanie w ten sposób rozwiązany, należy zwrócić się do serwisu klienta. Nie wolno samodzielnie naprawiać produktu.

<b>Usterka</b>	<b>Możliwa przyczyna i rozwiązanie</b>
Nie można włączyć produktu.	Upewnić się, że produkt jest prawidłowo naładowany.
Produkt się nie ładuje.	Upewnić się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do produktu i zasilacza USB oraz że zasilacz USB jest prawidłowo podłączony do gniazda.

## 10 Dane techniczne

### Produkt

Model:	NV8615D
Napięcie znamionowe:	3,7 V
Moc:	7 W
Pojemność akumulatora:	2000 mAh
Ustawienia prędkości:	2 (niska/wysoka)
Prędkość obrotowa:	1350 obr./min (niska) 1550 obr./min (wysoka)
Czas ładowania:	2,5 godziny
Czas użytkowania:	Okolo 1 godziny i 50 minut po pełnym naładowaniu
Waga:	266 g
Wymiary (dł. × szer. × głęb.):	180 × 64 × 89,5 mm

### Zasilacz USB

Napięcie wejściowe:	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A MAX
Napięcie wyjściowe:	5,0 V === 1,0 A 5,0 W
Klasa ochrony:	II
Numer modelu:	HNAA050100E1 (EU)

<b>Opublikowane dane</b>	<b>Wartość i dokładność</b>	<b>Jednostka</b>
Nazwa lub marka producenta, Numer w rejestrze handlowym i adres:	Shenzhen Huoniu Technology Co., Ltd. Block No.5, The 4th Industrial Zone, Xitian Community, Gongming Town, Guangming New District, Shenzhen, Chiny	
Oznaczenie modelu:	HNAA050100E1 (EU)	
Napięcie wejściowe:	100–240	V
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego:	50/60	Hz
Napięcie wyjściowe:	5,0	V
Prąd wyjściowy:	1,0	A
Moc wyjściowa:	5,0	W
Średni stopień sprawności podczas pracy:	75,91	%
Zużycie prądu przy obciążeniu zerowym:	0,10	W

## II Utylizacja

### II.1 Utylizacja opakowania



Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego kontenera na odpady. Tekturę i karton należy zutylizować razem z makulaturą, folię razem z tworzywem sztucznym.

## 11.2 Utylizacja produktu

(Obowiązuje w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki materiałów nadających się do recyklingu)



Zgodnie z art. 13 ust. 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym **zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.** Elektroodpady nie mogą być

wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga **uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.**

Ten symbol oznacza, że produktu nie można wyrzucać z pozostałymi odpadami domowymi (2012/19/UE).

### **Baterii i akumulatorów nie można wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!**



Użytkownik końcowy jest ustawowo zobowiązany do przekazania wszystkich baterii i akumulatorów – niezależnie od tego, czy zawierają one substancje niebezpieczne\*, czy nie – do punktu zbiórki w gminie lub do sprzedawcy, aby można je

było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Należy oddać kompletny produkt (w tym akumulator) do punktu zbiórki i upewnić się, że akumulator jest rozładowany!

\*oznaczono za pomocą: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

**Wskazówka:** Aby wyjąć akumulator, należy zdemonstrować zespół wentylatora i odłączyć zaciski akumulatora od obwodu drukowanego. Następnie zdjąć osłonę z końca uchwytu, aby wyjąć akumulator. Uważać, aby nie uszkodzić akumulatora przy wyjmowaniu. Należy pamiętać, że osłona zostanie uszkodzona, a wyjęcie akumulatora jest nieodwracalne.

## 12 Informacje gwarancyjne

Ten produkt jest objęty 2-letnią gwarancją zgodnie z regulacjami i przepisami europejskimi. Zakres gwarancji tego produktu jest ograniczony do usterek technicznych spowodowanych wadliwym procesem produkcji. W przypadku chęci wniesienia roszczenia z tytułu gwarancji należy zasięgnąć wskazówek w naszym Dziale Obsługi Klienta. Być może problem może być rozwiązany bez odsyłania produktu do sklepu czy Centrum Serwisowego. Nasz Dział Obsługi Klienta zawsze chętnie służy pomocą!

## 13 Obsługa klienta

Dalsze informacje o produktach Silk'n dostępne są na stronie regionalnej Silk'n: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, potrzebna jest naprawa lub nasza pomoc, prosimy zwrócić się do najbliższego Centrum Serwisowego Silk'n. Ten podręcznik użytkownika można pobrać również ze strony [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) w formacie PDF.

Numer Serwisu: +31 (0) 180-330550

E-mail: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

2402\_006\_PL



# Silk'n®

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam  
The Netherlands

[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) • [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)



© 2024 Silk'n Beauty Ltd. All rights reserved. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd.