
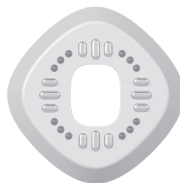


Silk'n®

FACETITE MULTIPLATFORM

H250I

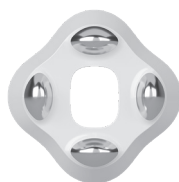

EN
DE
FR
NL
ES
IT
TR
PT
DA
NO
SV
CS
PL
LT
HU
RO

EN USER MANUAL

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

FR MODE D'EMPLOI

NL GEBRUIKSAANWIJZING

ES MANUAL DE USUARIO

IT MANUALE D'USO

TR KULLANIM KILAVUZU

PT MANUAL DO UTILIZADOR

DA BRUGERMANUAL

NO BRUKERHÅNDBOK

SV ANVÄNDARMANUAL

CS NÁVOD K POUŽITÍ




PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

LT VARTOTOJO VADOVAS


HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

A

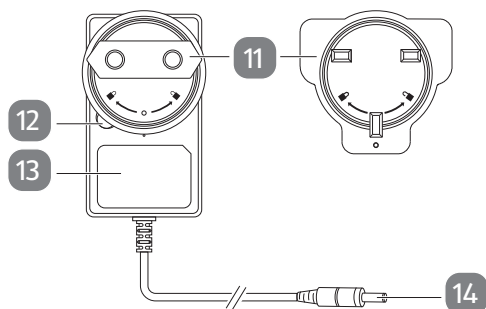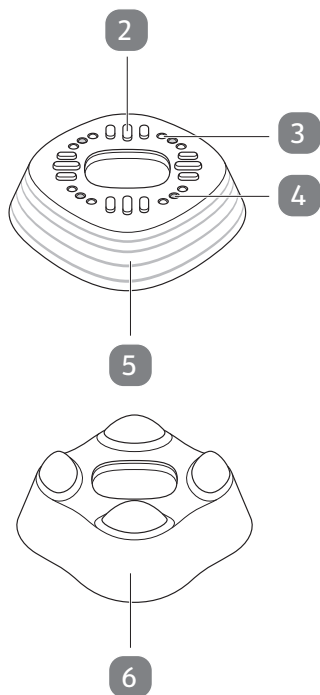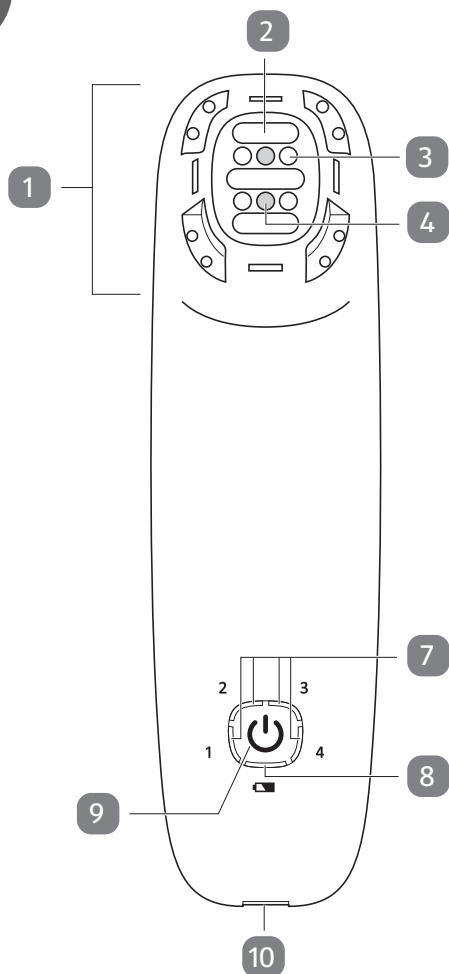

B

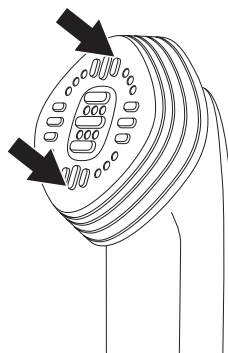

Informacja prawna

Invention Works B.V. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy efektywności, bezpieczeństwa użytkowania lub zdolności produkcyjnych.

Informacje udostępnione przez Inventioin Works B.V. zostają uznane za poprawne i wiarygodne w dniu ich opublikowania. Jednak Invention Works B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Invention Works B.V. nie przyznaje żadnej licencji dorozumianej, wynikającej z patentu lub podlegającej przepisom prawa patentowego.

Żadnej z części niniejszego dokumentu nie wolno w żadnej formie lub elektronicznie czy mechanicznie kopiować lub przekazywać w jakichkolwiek celach bez wyraźnej pisemnej zgody Invention Works B.V.

PL

Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Silkn Beauty Ltd. dysponuje patentami oraz zgłoszeniami patentowymi, znakami towarowymi, prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej, które są przedmiotem tego dokumentu. Udostępnienie niniejszego dokumentu nie oznacza przekazania licencji na patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, o ile nie jest to wyraźnie uregulowane w formie pisemnej umowy przez Silkn Beauty Ltd. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Silk'n i logo Silk'n są zarejestrowanymi znakami towarowymi Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Holandia
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Spis treści

I	Zakres dostawy/części urządzenia	195
2	Informacje ogólne	195
2.1	Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej	195
2.2	Objaśnienie symboli	195
3	Bezpieczeństwo	196
3.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	196
3.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	196
3.3	Przeciwwskazania	199
4	Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania	200
5	Cechy produktu	200
5.1	Różne nasadki	200
5.2	Funkcje bezpieczeństwa	201
6	Ładowanie	201
7	Obsługa	201
7.1	Przygotowanie	202
7.2	Użytkowanie produktu bez nasadki (do mniejszych obszarów)	202
7.3	Używanie produktu z nasadką RF (do większych powierzchni)	203
7.4	Używanie produktu z nasadką EMS	203
7.5	Po użyciu	204
8	Zalecenia dotyczące użytkowania produktu	204
8.1	Zakres zastosowania	204
8.2	Czego można oczekiwać podczas i po użyciu	204
8.3	Harmonogram stosowania	204
8.4	Możliwe skutki uboczne	205
9	Czyszczenie	205
10	Przechowywanie	205
11	Rozwiązywanie problemów	206
12	Dane techniczne	206
12.1	Informacje ogólne	206
12.2	Zasilacz	207
13	Utylizacja	208
13.1	Utylizacja opakowania	208
13.2	Utylizacja produktu	208
14	Informacje gwarancyjne	208
15	Obsługa klienta	208

I Zakres dostawy/części urządzenia

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Powierzchnia użytkowa RF | 8 Lampka kontrolna akumulatora/nasadki |
| 2 Elektrody | 9 Przycisk regulacji (⏻) |
| 3 Diody LED (diody świecące) | 10 Gniazdo ładowania |
| 4 Lampy podczerwieni (IR) | 11 Wtyczka sieciowa, 2× |
| 5 Nasadka RF | 12 Przycisk zwalniający |
| 6 Nasadka EMS | 13 Zasilacz |
| 7 Wskaźnik poziomu energii, 4× | 14 Gniazdo przyłączeniowe |

2 Informacje ogólne

2.1 Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej



Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia FaceTite MultiPlatform (zwanego dalej „produktem”). Zawiera ona ważne informacje potrzebne do rozpoczęcia użytkowania i obsługi.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności instrukcji bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji obsługi może doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu. Instrukcja obsługi opiera się na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Należy również przestrzegać wytycznych i przepisów krajowych. Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi w celu późniejszego wykorzystania. Przekazując produkt osobie trzeciej, koniecznie należy dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

2.2 Objasnienie symboli

Poniższe symbole i zwroty ostrzegawcze są używane w niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie oraz na opakowaniu.

OSTRZEŻENIE!

Symbol/zwrot ostrzegawczy wskazujący na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które – w przypadku jego zignorowania – może doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet do śmierci.

WSKAZÓWKA!

Zwrot ostrzegawczy ostrzegający przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ten symbol ostrzegawczy przekazuje przydatne informacje dodatkowe na temat użytkowania.



Zapoznać się z instrukcją obsługi.



Deklaracja zgodności: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie właściwe przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Ten symbol oznacza urządzenia elektryczne klasy ochrony II.



OSTRZEŻENIE: Nie używać produktu w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych pojemników napełnionych wodą.



Urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone jedynie do użytkowania w gospodarstwie domowym (w suchych pomieszczeniach).



Prąd stały.



Prąd przemienny.



Międzynarodowe oznaczenie sprawności wskazuje, że zasilanie spełnia wymagania poziomu VI.



Produkty oznaczone tym symbolem mają dodatnią polaryzację. Można je podłączać tylko do produktów, które mają również dodatnią polaryzację.



Jeśli zasilacz jest uszkodzony lub jego styki są wygięte, należy zaprzestać jego używania i zutylizować go.

ta

Temperatura otoczenia (zasilacz).



Znak kontrolny potwierdza, że produkt jest zgodny z normami krajowymi i międzynarodowymi.

PL

3 Bezpieczeństwo

3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt został skonstruowany w celu poprawy wyglądu skóry, zapewnienia działania ujędrniającego, stymulacji tworzenia nowego kolagenu i wspierania redukcji widocznych zmarszczek. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nie zastosowania komercyjnego. Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie jest przeznaczony do leczenia schorzeń. Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Każdy inny sposób wykorzystania produktu uznaje się za niezgodny z przeznaczeniem i może doprowadzić do strat materialnych lub stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe wskutek użytkowania produktu w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

3.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Produkt podłączać tylko wtedy, gdy napięcie sieciowe gniazda odpowiada danym na tabliczce znamionowej zasilacza.
- Zasilacz podłączać wyłącznie do łatwo dostępnego gniazdka, aby w razie problemów można go było szybko odłączyć od sieci elektrycznej.
- Dostarczony zasilacz wolno podłączać wyłącznie do produktu. Nie używać go do innych celów.

- Nie używać produktu i zasilacza, jeśli są uszkodzone lub wadliwe. Uszkodzone lub wadliwe części muszą zostać wymienione przez producenta lub serwis, aby uniknąć ryzyka.
- Nie używać zasilacza, jeśli jego kabel lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa on prawidłowo lub jeśli został zanurzony w wodzie.
- Nie otwierać obudowy, a naprawę zlecać specjalistom. W tym celu należy zwracać się do działu obsługi klienta. W przypadku naprawy przeprowadzonej we własnym zakresie, nieprawidłowego podłączenia lub nieodpowiedniej obsługi wyklucza się roszczenia gwarancyjne.
- Do naprawy urządzenia wolno stosować tylko części odpowiadające jego pierwotnym danym. W produkcie znajdują się części elektryczne i mechaniczne nieodpowiednie do bezpiecznego użytkowania.
- Nie zanurzać zasilacza ani kabla sieciowego w wodzie lub innych cieczach.
- Nie należy umieszczać produktu ani zasilacza w taki sposób, aby mogły wpaść do wanny lub umywalki. Nie są one wodoodporne.
- Nie sięgać po produkt, jeśli wpadł do wody. Należy natychmiast odłączyć zasilanie, zanim produkt zostanie dotknięty. Jeśli produkt nie zostanie odłączony od źródła prądu, może to prowadzić do porażenia prądem.
- Zawsze wyłączać produkt, gdy nie jest używany, w celu wyczyszczenia lub gdy wystąpiła usterka. Gdy produkt nie jest ładowany, należy zawsze odłączać zasilacz od sieci elektrycznej.
- Nigdy nie dotykać produktu ani zasilacza wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do obudowy.
- Nie odłączać zasilacza od gniazdka za kabel, lecz zawsze chwytać za sam zasilacz. Nigdy nie transportować, nie ciągnąć ani nie przenosić produktu za kabel.
- Przechowywać produkt i zasilacz z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Kabel należy ułożyć w taki sposób, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia.
- Nie załamywać kabla ani nie owijać go wokół zasilacza. Nie układać kabla przez ostre krawędzie.
- Produkt należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach.
- Produkt ładować w temperaturze od 10 do 35 °C.
- Nie należy używać produktu z zewnętrznym wyłącznikiem czasowym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

! OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Produkt ani jego żadne komponenty nie mogą być używane przez następujące osoby: Dzieci, osoby dorosłe o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, osoby bez doświadczenia lub wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z produktu oraz osoby, które nie rozumieją zagrożeń związanych z korzystaniem z produktu.
- Dzieci nie powinny bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci należy trzymać z dala od produktu i zasilacza.
- Nie pozostawiać produktu bez nadzoru, gdy jest podłączony do gniazdka.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się opakowaniem z tworzywa sztucznego. Mogłyby się podczas zabawy w nią zaplątać i udusić.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych wraz produktem.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wyciekać płyn – unikać kontaktu z nim. Ciecz wyciekająca z baterii może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- W przypadku kontaktu skóry, oczu lub błon śluzowych z płynem z baterii należy natychmiast przemyć i spłukać dotknięte obszary czystą wodą. W razie potrzeby proszę skonsultować się z lekarzem.
- Baterii nie wolno demontować, zwierać ani wrzucać do ognia. Produkt zawiera niewymienny akumulator.

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Umieścić produkt na łatwo dostępnej, równej, suchej, odpornej na wysoką temperaturę i wystarczająco stabilnej powierzchni. Nie umieszczać produktu na krawędzi powierzchni.
- Produkt został opracowany i przetestowany zgodnie z wymogami częstotliwości radiowej. Mimo tego mogą wystąpić interferencje elektromagnetyczne lub inne zakłócenia. Zmiana lokalizacji produktu może pomóc wyeliminować zakłócenia.
- Produkt, zasilacz i akcesoria należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
- Nigdy nie próbować czyścić produktu, zanurzając go w wodzie ani nie czyścić go myjką parową.
- Nie ładować urządzenia na lub w pobliżu potencjalnie łatwopalnych materiałów (np. materacy, koców lub drewna) lub w pobliżu cieczy.

3.3 Przeciwwskazania

PRODUKTU NIE MOGĄ UŻYWAĆ OSOBY, KTÓRE

- noszą rozrusznik serca, wszczepiony defibrylator lub inny aktywny implant elektroniczny.
- mają trudne do kontrolowania zaburzenia endokrynologiczne, takie jak cukrzyca lub problemy z tarczycą.
- obecnie chorują lub chorowały na raka skóry, inny nowotwór lub mają znamiona przednowotworowe.
- przeszły w ciągu ostatnich 3 miesięcy radioterapię lub chemioterapię lub obszary skóry mają potencjalnie złośliwe guzy.
- ich układ odpornościowy jest osłabiony z powodu chorób immunosupresyjnych, takich jak AIDS lub HIV, lub na skutek przyjmowania leków immunosupresyjnych.
- stosowały izotretynoinę (Accutane®) w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed użyciem tego produktu.
- mają choroby związane z nadwrażliwością na światło, takie jak porfiria, polimorficzna dermatoma świetlna (PLD), uczulenie na światło, toczeń itp.
- cierpią na epilepsję.
- są w ciąży lub karmią piersią.

NIE PODDAWAĆ ZABIEGOM OBSZARÓW, W KTÓRYCH

- obecne są stałe implanty, takie jak metalowe płytki i śruby (wyjątek: implanty jamy ustnej), implanty silikonowe lub wstrzyknięte wypełnienia lub toksyny.
- występują miejscowe rany, egzema, wysypka, otwarte skaleczenia, otarcia, uszkodzenia skóry, łuszczyca itp. w miejscu stosowania produktu.
- skóra ropyje lub jest w stanie zapalnym lub w przeszłości występowały blizny rozrostowe, problemy z gojeniem się ran lub wrażliwością skóry.
- znajdują się kolczyki lub inne metalowe przedmioty (np. z tytanu).
- w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed użyciem produktu przeprowadzono zabieg chirurgiczny.

Przed dalszym stosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem, jeśli w ciągu pierwszych 48 godzin stosowania wystąpią nieoczekiwane działania niepożądane, takie jak swędzenie skóry.

SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM POWINNY OSOBY, KTÓRE

- cierpią na cerę naczynkową lub trądzik różowaty.
- w obszarze, który ma być poddany zabiegowi, występowały w przeszłości choroby stymulowane ciepłem, takie jak opryszczka zwykła. W takim przypadku można nadal używać tego produktu po odpowiednim leczeniu profilaktycznym.
- w ciągu ostatnich 6 miesięcy stosowały na skórę leki przepisane przez lekarza.
- cierpią na choroby skóry, blizny lub zaburzenia gojenia się ran.
- mają inne problemy medyczne, które w opinii lekarza lub dermatologa wykluczają bezpieczne stosowanie tego produktu.

4 Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania

PL

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nieostrożne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innym ostrym przedmiotem może spowodować uszkodzenie produktu. Opakowanie należy otwierać bardzo ostrożnie.
1. Wyjąć produkt z opakowania.
 2. Upewnić się, czy dostarczony produkt jest kompletny (patrz **rys. A**).
 3. Sprawdzić, czy produkt lub jego poszczególne części nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie należy korzystać z produktu. Prosimy zwrócić się do działem obsługi klienta.

5 Cechy produktu

5.1 Różne nasadki

Produkt posiada powierzchnię użytkową RF **1**. Wspomaga odmładzanie skóry za pomocą połączenia technologii podczerwieni (IR), technologii światła LED i bipolarna energia o częstotliwości radiowej (RF).

W celu poprawy wyglądu skóry dołączone są następujące nasadki:

Nasadka RF **5**: to rozszerzenie powierzchni użytkowej RF nadaje się idealnie do skutecznego stosowania na większych obszarach (np. policzkach lub szyi).

Nasadka EMS **6**: wykorzystuje mikroprąd do stymulacji ruchu mięśni, wspiera krążenie krwi i eliminuje obrzęki. Skrót EMS oznacza elektryczną stymulację mięśni. Nasadka służy do bardziej wydajnego stosowania na większych obszarach (np. policzki lub linia żuchwy).

5.2 Funkcje bezpieczeństwa

Produkt jest wyposażony w funkcje bezpieczeństwa, które chronią skórę przed nadmiernym nagrzananiem.

Czujnik temperatury i regulator ciepła: czujnik temperatury wykrywa temperaturę skóry. Regulator ciepła dba o to, aby – w zależności od wybranego poziomu energii (1–4, między 40 a 43 °C) – energia RF nie była automatycznie dostarczana do momentu, aż skóra ostygnie na tyle, aby energia mogła być ponownie dostarczana. Chroni to skórę przed nadmiernym nagrzananiem.

Czujnik ruchu: dba o to, aby energia RF była emitowana tylko wtedy, gdy produkt jest przesuwany po skórze.

Automatyczne wyłączenie: produkt wyłącza się automatycznie po 15 minutach użytkowania z nasadką lub bez niej.

6 Ładowanie

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

• Nie ładować urządzenia na lub w pobliżu potencjalnie łatwopalnych materiałów (np. materacy, koców lub drewna) lub w pobliżu cieczy.



- Należy w pełni naładować produkt przed pierwszym użyciem i gdy poziom naładowania baterii jest niski.
- Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, lampka kontrolna akumulatora/nasadki świeci podczas pracy na pomarańczowo. Naładować produkt.
- Jeśli produkt jest przechowywany przez dłuższy czas, należy sprawdzać poziom naładowania baterii i regularnie ładować produkt.
- Produkt może być również użytkowany za pośrednictwem zasilacza sieciowego podłączonego do sieci elektrycznej.

1. Podłączyć gniazdo przyłączeniowe **14** zasilacza **13** do gniazda ładowania **10** produktu.
2. Podłączyć odpowiednią wtyczkę sieciową **11** (2 lub 3 bolce) do zasilacza.

W celu instalacji należy włożyć wtyczkę sieciową do zasilacza i obrócić ją w kierunku symbolu blokady () tak, aby się zablokowała.

W celu odłączenia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający **12** i obrócić wtyczkę sieciową w kierunku symbolu odblokowania () tak, aby można ją było odłączyć od zasilacza.

3. Podłączyć zasilacz do gniazda zasilania.

Proces ładowania rozpocznie się automatycznie. Lampka kontrolna akumulatora/nasadki **8** miga na pomarańczowo podczas ładowania i świeci na zielono, gdy ładowanie jest zakończone.

4. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej i odłączyć gniazdo przyłączeniowe od gniazda ładowania produktu.

7 Obsługa



- Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić wszystkie części produktu zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”.
- Przed użyciem należy przeczytać rozdział „Zalecenia dotyczące użytkowania produktu”.

7.1 Przygotowanie

1. Przed użyciem produktu należy go w pełni naładować (patrz rozdział „Ładowanie”). Produkt można również użytkować za pośrednictwem zasilacza **13** podłączonego do sieci elektrycznej.
2. W razie potrzeby założyć nasadkę RF **5** lub nasadkę EMS **6** do powierzchni użytkowej RF **11**.
 Użyć nasadki RF, aby skuteczniej stosować produkt na większych obszarach (np. policzkach lub szyi).
 Użyć nasadki EMS, aby stymulować mięśnie za pomocą mikroprądu.
 Aby zamocować wybraną nasadkę, lekko docisnąć ją do powierzchni użytkowej RF tak, aby się zablokowała (patrz **rys. B**). Upewnić się, że trójkątne oznaczenie z tyłu nasadki jest skierowane w górę.
 Aby zdjąć nasadkę, należy ją delikatnie pociągnąć, aż odłączy się od powierzchni użytkowej RF.
3. Skóra musi być czysta i sucha. Upewnić się, że zdjęto całą biżuterię.
4. Nałożyć cienką warstwę żelu na bazie wody na powierzchnię użytkową produktu lub nasadki.
 Żel na bazie wody zapewnia przewodnictwo i ułatwia przesuwanie produktu po skórze. W celu optymalnego, bezpiecznego i wydajnego korzystania z produktu zalecamy stosowanie żelu Silk'n Slider.

7.2 Użytkowanie produktu bez nasadki (do mniejszych obszarów)

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk regulacji (**⏮**) **9**, aby włączyć produkt. Produkt pracuje na poziomie energii I. Lampka kontrolna pierwszego wskaźnika poziomu energii **7** zaświeci.
2. Przytrzymać produkt przy skórze i przesuwać go po niej delikatnymi ruchami przypominającymi masaż.
 Zwrócić uwagę na to, aby elektrody **2** miały styczność ze skórą.
 Włączone są również diody LED **3** i lampy podczerwieni (IR) **4**.
3. W razie potrzeby nacisnąć ponownie przycisk regulacji (**⏮**), aby zmienić poziom energii. Podczas zmiany poziomu energii produkt nie może mieć kontaktu ze skórą. Produkt przechodzi kolejno przez różne poziomy energii (I–4). Świecą przy tym odpowiednie lampki kontrolne poziomu energii. Jeśli urządzenie pracuje na poziomie energii 4 i ponownie zostanie wciśnięty przycisk regulacji (**⏮**), produkt przełączy się z powrotem na poziom energii I.
 Jak będzie można zauważyć, przy wyższych poziomach energii wzrasta również temperatura. Podczas stosowania skóra może być lekko zaczerwieniona. Jest to całkowicie normalne i nie stanowi powodu do niepokoju.
 Przy najwyższym poziomie energii uzyskuje się najlepsze rezultaty. Ważne jest jednak, aby stosowanie z wybranym poziomem energii było przyjemne dla użytkownika. Gdyby tak nie było, należy wybrać niższy poziom energii.
4. Należy zadbać o to, aby podczas stosowania na powierzchni użytkowej lub na nasadce zawsze znajdowała się wystarczająca ilość żelu.
5. Stosować produkt na małych obszarach (np. fałdy nosowo-wargowe lub między brwiami) każdorazowo przez co najmniej 3 minuty.

Nie należy trzymać przy tym produktu tylko w jednym miejscu na skórze. Zawsze przesuwaj go po całym obszarze. Zapobiega to nadmiernemu nagrzewaniu się skóry i innym potencjalnym skutkom ubocznym.

7.3 Używanie produktu z nasadką RF (do większych powierzchni)

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk regulacji (⏻) 9, aby wyłączyć produkt.

Produkt pracuje na poziomie energii 1. Lampka kontrolna pierwszego wskaźnika poziomu energii 7 zaświeci.

Lampka kontrolna akumulatora/nasadki 8 świeci na zielono podczas użytkowania, wskazując, że nasadka została prawidłowo zamontowana. Jeśli nasadka nie została prawidłowo zamontowana, lampka kontrolna miga na zielono. W takim przypadku należy prawidłowo założyć nasadkę.

2. Przytrzymać produkt przy skórze i przesuwaj go po niej delikatnymi ruchami przypominającymi masaż. Zwrócić uwagę na to, aby elektrody 2 miały styczność ze skórą. Włączone są również diody LED 3 i lampy podczerwieni (IR) 4.

3. Używać produktu tak, jak opisano w krokach 3 i 4 w rozdziale 7.2.

4. Stosować produkt na większych obszarach (np. policzki lub szyja) przez co najmniej 5 minut.

Nie należy trzymać przy tym produktu tylko w jednym miejscu na skórze. Zawsze przesuwaj go po całym obszarze. Zapobiega to nadmiernemu nagrzewaniu się skóry i innym potencjalnym skutkom ubocznym.

7.4 Używanie produktu z nasadką EMS

1. W punkcie 1 w rozdziale 7.3 znajdują się informacje, jak upewnić się, że nasadka EMS została prawidłowo założona.

2. Przytrzymać produkt przy skórze i przesuwaj go po niej liniowymi ruchami. Zwrócić uwagę na to, aby elektrody 2 miały styczność ze skórą.

Diody LED 3 i lampy podczerwieni (IR) 4 nie działają, gdy używana jest nasadka EMS.

3. W razie potrzeby nacisnąć ponownie przycisk regulacji (⏻) 9, aby zmienić poziom energii.

Podczas zmiany poziomu energii produkt nie może mieć kontaktu ze skórą.

Produkt przechodzi kolejno przez różne poziomy energii (1–4). Świecą przy tym odpowiednie lampki kontrolne poziomu energii. Jeśli urządzenie pracuje na poziomie energii 4 i ponownie zostanie wciśnięty przycisk regulacji (⏻), produkt przełączy się z powrotem na poziom energii 1.

Zauważalne będzie, jak lekkie impulsy elektryczne powodują skurcze mięśni twarzy.

Przy najwyższym poziomie energii uzyskuje się najlepsze rezultaty. Ważne jest jednak, aby stosowanie z wybranym poziomem energii było przyjemne dla użytkownika. Gdyby tak nie było, należy wybrać niższy poziom energii.

4. Należy zadbać o to, aby podczas stosowania na nasadce zawsze znajdowała się wystarczająca ilość żelu.

5. Stosować produkt na większych obszarach (np. policzki lub szczęką) przez co najmniej 5 minut.

Nie należy trzymać przy tym produktu tylko w jednym miejscu na skórze. Zawsze przesuwaj go po całym obszarze.

7.5 Po użyciu

1. Po użyciu nacisnąć i przytrzymać przycisk regulacji (⏮) **9**, aby wyłączyć produkt. Jeśli jest podłączony, należy odłączyć zasilacz **13** od sieci elektrycznej.
2. Usunąć ze skóry ewentualne pozostałości żelu na bazie wody. Następnie spłukać skórę letnią wodą.
3. Osuszyć skórę ręcznikiem i nałożyć krem do twarzy, aby ukoić i nawilżyć skórę.
4. Po użyciu należy dokładnie wyczyścić produkt (patrz rozdział „Czyszczenie”).

8 Zalecenia dotyczące użytkowania produktu

8.1 Zakres zastosowania

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Nie należy patrzeć bezpośrednio w światło emitowane przez produkt. Podczas stosowania produktu w okolicy oczu należy zamknąć oczy.

Obszar	Cel
Czoło (w tym obszar między brwiami)	Redukcja zmarszczek
Lewy i prawy policzek (w tym okolice oczu, ale bez powiek)	Redukcja zmarszczek i zwiększenie objętości
Szyja	Redukcja zmarszczek na szyi

8.2 Czego można oczekiwać podczas i po użyciu

- Ze względu na energię RF występuje zauważalne rozgrzanie.
- Podczas korzystania z nasadki EMS **6** odczuwalne jest lekkie mrowienie spowodowane prądem elektrycznym.
- Po użyciu może wystąpić lekkie zaczerwienienie lub obrzęk. Powinny one zniknąć w ciągu kilku godzin lub maksymalnie w ciągu jednego dnia.

8.3 Harmonogram stosowania

- Zawsze rozpoczynać stosowanie na poziomie energii I i stopniowo zwiększać poziom energii, jeśli stosowanie jest nadal odczuwane jako przyjemne.
- Stosować produkt na większych obszarach (np. policzki lub szyja) przez co najmniej 5 minut jednorazowo lub na mniejszych obszarach (np. fałdy nosowo-wargowe lub między brwiami) przez co najmniej 3 minuty jednorazowo.
- Produkt należy stosować dwa razy w tygodniu przez 10 tygodni. Pierwsze widoczne rezultaty pojawiają się po 5 tygodniach lub 10 sesjach.
- Następnie stosować produkt raz na 2 tygodnie, aby utrzymać rezultaty.
- Aby rezultaty były trwałe, ważne jest regularne stosowanie produktu.

8.4 Możliwe skutki uboczne

Aby uniknąć skutków ubocznych, należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i przeciwwskazań. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymującego się dyskomfortu, takiego jak ból, zaczerwienienie, obrzęk lub uczucie pieczenia itp.

Następujące działania niepożądane są wprawdzie rzadkie, ale mogą jednak wystąpić:

- Nadmierny obrzęk (opuchlizna) i rumień (zaczerwienienie): Jeśli do tego dojdzie, należy chłodzić dotknięty obszar zimną, wilgotną szmatką przez co najmniej 10 minut, a następnie nałożyć krem przeciw oparzeniom. Objawy powinny ustąpić w ciągu kilku dni.
- Rozszerzenie powierzchownych naczyń włosowatych: Może to spowodować tymczasowe zaczerwienienie, utrzymujące się przez kilka dni. Niektóre naczynia włosowate mogą również mieć czerwone plamki, które z czasem powinny ustąpić. W przypadku ich wystąpienia należy natychmiast schłodzić dotknięte obszary zimną wodą.

9 Czyszczenie

PL

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy zawsze odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej.

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie ani innych cieczach. Upewnić się, że do obudowy nie przedostała się woda ani inne ciecze.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, szczotek ze szczeciną metalową lub nylonową, ani ostrych przedmiotów do czyszczenia lub przedmiotów wykonanych z metalu, takich jak noże, twarde szpachle itp.

1. Wyczyścić produkt wilgotną ściereczką. Upewnić się, że produkt jest wolny od pozostałości żelu na bazie wody.
2. Dokładnie osuszyć produkt czystą, suchą i miękką ściereczką.

10 Przechowywanie

Do przechowywania produktu wszystkie części powinny być zupełnie suche.

- Produkt należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

11 Rozwiązywanie problemów

Problemy mogą być spowodowane nieznacznymi usterkami, które można samodzielnie usunąć. W tym celu należy przestrzegać instrukcji z poniższej tabeli. Jeśli problem nie zostanie w ten sposób rozwiązany, należy zwrócić się do Działu Obsługi Klienta. Nie wolno samodzielnie naprawiać produktu.

Usterka	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Produkt nie działa.	• Upewnić się, że ani sam produkt, ani zasilacz nie są uszkodzone i że zasilacz 13 jest prawidłowo podłączony do gniazda. • Upewnić się, że produkt jest wystarczająco naładowany, jeśli nie jest użytkowany z zasilaczem.
Podczas użytkowania nie są odczuwalne ciepło ani mikroprąd.	• Zwrócić uwagę na to, aby elektrody 2 miały styczność ze skórą.
Nasadka 5 / 6 nie działa.	• Upewnić się, że nasadka została prawidłowo założona na produkt. Gdy nasadka jest prawidłowo założona, lampka kontrolna akumulatora/nasadki 8 świeci na zielono.
Podczas użytkowania miga co najmniej jedna lampka kontrolna.	• Wystąpił błąd podczas użytkowania. Wyłączyć i z powrotem włączyć produkt.

PL

12 Dane techniczne

12.1 Informacje ogólne

Model:	H250I
Napięcie znamionowe:	12 V
Pojemność akumulatora:	4 000 mAh, litowy
Typ akumulatora:	1 × 4 000 mAh, litowy (przeznaczony do ponownego ładowania)
Technologia:	Home Tightening™
Diody LED (długość fali):	630 nm ± 20 nm
IR (długość fali):	780 nm ± 20 nm
RF	
Maks. moc wyjściowa:	20 W
Częstotliwość wyjściowa jednostki głównej:	1 MHz ± 30 %
Częstotliwość wyjściowa nasadki RF:	1 MHz ± 30 %
Impuls (nasadka EMS)	
Częstotliwość:	100 Hz ± 10 % (tryb Lift); 2 Hz ± 10 % (tryb Slap)
Maks. napięcie:	10 W
Warunki transportu/przechowywania	
Temperatura:	-40 do +70 °C
Wilgotność względna:	10–90 %
Ciśnienie atmosferyczne:	500–1 060 hPa

Warunki pracy
Temperatura: 10 do 35 °C
Wilgotność względna: 30–75 %
Ciśnienie atmosferyczne: 700–1 060 hPa

Waga
Jednostka główna: 210 g
Nasadka RF: 45 g
Nasadka EMS: 55 g

Wymiary (dł. × szer. × wys.)
Jednostka główna: 175 × 56 × 45 mm
Jednostka główna + nasadka RF: 189 × 71 × 61 mm
Jednostka główna + nasadka EMS: 189 × 71 × 66 mm

12.2 Zasilacz

Numer modelu: DZ024CHL I 20200H
Wejście: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Wyjście: 12,0 V DC; 2,0 A; 24,0 W
Klasa ochrony: II

Opublikowane dane	Wartość i dokładność	Jednostka
Nazwa lub marka producenta, numer rejestru handlowego i adres:	Guangdong Keerda Electronics Co., Ltd 440681000450656, Shilong Intensive Industrial Park, Lunjiao Shunde District, Foshan, Guangdong, Chiny	
Napięcie wejściowe:	100–240	V
Częstotliwość prądu przemiennego:	50/60	Hz
Prąd wejściowy:	0,8	A
Napięcie wyjściowe:	12,0	V
Prąd wyjściowy:	2,0	A
Moc wyjściowa:	24,0	W
Średni stopień sprawności podczas pracy:	86,2	%
Stopień sprawności przy niskim obciążeniu (10 %):	76,8	%
Zużycie prądu przy obciążeniu zerowym:	0,1	W

13 Utylizacja

13.1 Utylizacja opakowania



Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego kontenera na odpady. Teksturę i karton należy zutylizować razem z makulaturą, folię razem z tworzywem sztucznym.

13.2 Utylizacja produktu

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych państw europejskich, posiadających systemy do segregacji surowców wtórnych)



Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!

Jeśli produkt nie może być już dłużej używany, **należy zutylizować je zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym regionie lub kraju.**

W ten sposób zapewnia się profesjonalną utylizację starych urządzeń i unika negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dlatego urządzenia elektryczne są oznaczone przedstawionym symbolem.

PL

Baterii i akumulatorów nie można wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!



Użytkownik końcowy jest ustawowo zobowiązany do przekazania wszystkich baterii i akumulatorów – niezależnie od tego, czy zawierają one substancje niebezpieczne*, czy nie – do punktu zbiórki w gminie lub do sprzedawcy, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Należy oddać kompletny produkt (w tym akumulator) do punktu zbiórki i upewnić się, że akumulator jest rozładowany!

* oznaczono za pomocą: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

14 Informacje gwarancyjne

Ten produkt jest objęty 2-letnią gwarancją zgodnie z regulacjami i przepisami europejskimi. Zakres gwarancji tego produktu jest ograniczony do usterek technicznych spowodowanych wadliwym procesem produkcji. W przypadku chęci wniesienia roszczenia z tytułu gwarancji należy zasięgnąć wskazówek w naszym Dziale Obsługi Klienta. Być może problem może być rozwiązany bez odsyłania produktu do sklepu czy Centrum Serwisowego. Nasz Dział Obsługi Klienta zawsze chętnie służy pomocą!

15 Obsługa klienta

Dalsze informacje o produktach Silk'n dostępne są na stronie regionalnej Silk'n: www.silkn.eu. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, potrzebna jest naprawa lub nasza pomoc, prosimy zwrócić się do najbliższego Centrum Serwisowego Silk'n. Ten podręcznik użytkownika można pobrać również ze strony www.silkn.eu w formacie PDF.

Numer Serwisu: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu



2307_005_MULT1



PB119823A

Silk'n[®]

Manufacturer

Silkn Beauty Ltd.
Alon Ha-Tavor 15
Caesarea, 3079516
Israel

Distributor

Invention Works B.V.
Galileistraat 17
3029 AL Rotterdam
The Netherlands

UK Representative

Silk'n UK Ltd.
2nd Floor, De Burgh House, Market Road
Wickford, Essex, SS12 0FD
United Kingdom



© 2023 Silkn Beauty Ltd. All rights reserved. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silkn Beauty Ltd.