

Silk'n®

LED CHEST MASK PRO

FAC09






EN
DE
FR
NL
ES
IT
TR
PT
DA
NO
SV
CS
PL
LT
HU
RO

- EN USER MANUAL
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES MANUAL DE USUARIO
- IT MANUALE D'USO
- TR KULLANIM KILAVUZU
- PT MANUAL DO UTILIZADOR

- DA BRUGERMANUAL
- NO BRUKERHÅNDBOK
- SV ANVÄNDARMANUAL
- CS NÁVOD K POUŽITÍ
- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- LT VARTOTOJO VADOVAS
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

A

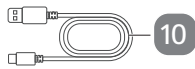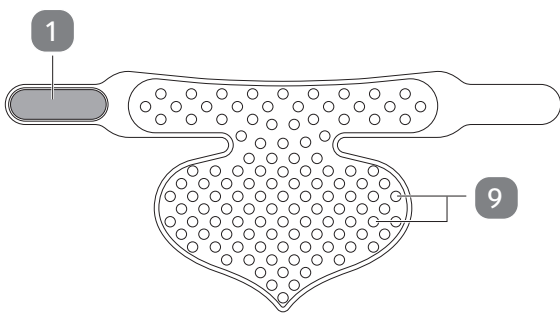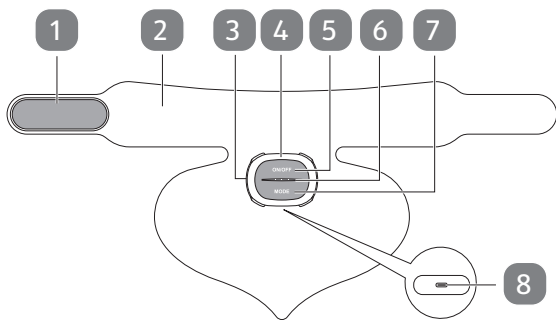

Prawa autorskie 2025 © Silkn Beauty Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacja prawna

Invention Works B.V. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy efektywności, bezpieczeństwa użytkowania lub zdolności produkcyjnych. Informacje udostępnione przez Invention Works B.V. zostają uznane za poprawne i wiarygodne w dniu ich opublikowania. Jednak Invention Works B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Invention Works B.V. nie przyznaje żadnej licencji dorozumianej, wynikającej z patentu lub podlegającej przepisom prawa patentowego.

Żadnej z części niniejszego dokumentu nie wolno w żadnej formie lub elektronicznie czy mechanicznie kopiować lub przekazywać w jakichkolwiek celach bez wyraźnej pisemnej zgody Invention Works B.V.

Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Silkn Beauty Ltd. dysponuje patentami oraz zgłoszeniami patentowymi, znakami towarowymi, prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej, które są przedmiotem tego dokumentu. Udostępnienie niniejszego dokumentu nie oznacza przekazania licencji na patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, o ile nie jest to wyraźnie uregulowane w formie pisemnej umowy przez Silkn Beauty Ltd. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Silk'n i logo Silk'n są zarejestrowanymi znakami towarowymi Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Holandia
www.silkn.eu – info@silkn.eu

PL

Spis treści

1	Zakres dostawy / części urządzenia	194
2	Informacje ogólne	194
2.1	Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej	194
2.2	Objaśnienie symboli	194
3	Bezpieczeństwo	195
3.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	195
3.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	195
4	Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania	199
5	Ładowanie	200
6	Obsługa	201
6.1	Przygotowanie	201
6.2	Przeprowadzanie sesji	201
6.3	Wybór trybów pracy	202
7	Harmonogram stosowania	204
8	Czyszczenie	204
9	Przechowywanie	205
10	Rozwiązywanie problemów	205
11	Dane techniczne	206
12	Utylizacja	206
12.1	Utylizacja opakowania	206
12.2	Utylizacja produktu	207
13	Informacje gwarancyjne	207
14	Obsługa klienta	208

I Zakres dostawy / części urządzenia

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 Pasek na szyję, 2× | 7 Przycisk wyboru trybu |
| 2 Maska LED na klatkę piersiową / szyję | 8 Gniazdo ładowania |
| 3 Uchwyt magnetyczny | 9 Diody LED |
| 4 Kontroler | 10 Kabel USB do ładowania |
| 5 Przycisk włączania/wyłączania | 11 Torba do przechowywania |
| 6 Lampka kontrolna 3× | |

2 Informacje ogólne

2.1 Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej



Niniejsza instrukcja obsługi należy do LED Chest Mask Pro (zwanej dalej „produktem”). Zawiera ona ważne informacje potrzebne do rozpoczęcia użytkowania i obsługi.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności instrukcji bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji obsługi może doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu. Instrukcja obsługi opiera się na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Należy również przestrzegać wytycznych i przepisów krajowych. Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi w celu późniejszego wykorzystania. Przekazując produkt osobie trzeciej, koniecznie należy dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

2.2 Objaśnienie symboli

Poniższe symbole i zwroty ostrzegawcze są używane w niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie oraz na opakowaniu.



OSTRZEŻENIE!

Symbol/zwrot ostrzegawczy wskazujący na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które – w przypadku jego zignorowania – może doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet do śmierci.

WSKAZÓWKA!

Zwrot ostrzegawczy ostrzegający przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ten symbol ostrzegawczy przekazuje przydatne informacje dodatkowe na temat użytkowania.



Zapoznać się z instrukcją obsługi.



Deklaracja zgodności: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie właściwe przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone jedynie do użytkowania w gospodarstwie domowym (w suchych pomieszczeniach).



Prąd stały.

3 Bezpieczeństwo

3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

PL Produkt jest przeznaczony jedynie do poprawy blasku, elastyczności i tekstury skóry oraz zmniejszenia widoczności zmarszczek, drobnych linii i pigmentacji. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nie zastosowania komercyjnego. Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Każdy inny sposób wykorzystania produktu uznaje się za niezgodny z przeznaczeniem i może doprowadzić do strat materialnych lub stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe wskutek użytkowania produktu w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

3.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Produkt może być używany wyłącznie z dołączonym kablem USB do ładowania.
- Produkt może być zasilany wyłącznie bezpiecznym, niskim napięciem, zgodnie z

- oznaczeniem na produkcie.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony lub kabel USB do ładowania jest wadliwy.
 - Nie otwierać obudowy, a naprawę zlecać specjalistom. W tym celu należy zwracać się do działu obsługi klienta. W przypadku naprawy przeprowadzonej we własnym zakresie, nieprawidłowego podłączenia lub nieodpowiedniej obsługi wyklucza się roszczenia gwarancyjne.
 - Do naprawy urządzenia wolno stosować tylko części odpowiadające jego pierwotnym danym. W produkcie znajdują się części elektryczne i mechaniczne nieodzwonne do bezpiecznego użytkowania.
 - Nie zanurzać produktu ani kabla USB do ładowania w wodzie lub w innych cieczach. Należy trzymać go z dala od wody.
 - Zawsze wyłączać produkt, gdy nie jest używany, w celu wyczyszczenia lub gdy wystąpiła usterka. Zawsze odłączać kabel USB do ładowania, gdy produkt nie jest ładowany.
 - Nigdy nie dotykać kabla USB do ładowania wilgotnymi lub mokrymi rękami.
 - Nie wkładać żadnych przedmiotów do obudowy.
 - Trzymać produkt i wszystkie jego części z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.

- Kabel USB do ładowania należy poprowadzić w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko potknięcia.
- Nie wyciągać kabla USB do ładowania ze źródła zasilania USB, ciągnąc za przewód, zawsze chwytać za wtyczkę kabla.
- Nie zaginać kabla USB do ładowania i nie prowadzić go przez ostre krawędzie.
- Produkt należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach.
- Nie używać produktu podczas ładowania.



OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Ten produkt nie może być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci.
- Dzieci należy trzymać z dala od produktu i kabla USB do ładowania.
- Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, dzieci, osoby z epilepsją,

osoby z chorobami tarczycy, osoby przyjmujące leki na tarczycę, osoby z fotoalergią lub osoby przyjmujące leki na alergię na światło.

- Produkt nie może być stosowany w przypadku chorób skóry, ropiejących ran, ran powypadkowych i pooperacyjnych.
- Używać trybu z niebieskimi diodami LED (tryby F2 i F6) przez maksymalnie 10 minut na stosowanie i maksymalnie 3 stosowania tygodniowo. Z pozostałych trybów można korzystać codziennie od czwartego tygodnia.
- W razie wątpliwości co do możliwości stosowania produktu należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu, wystąpienia nietypowych reakcji (np. swędzenia lub nieprzyjemnego stanu zapalnego) lub nieprzyjemnego nagrzania skóry, należy zaprzestać stosowania produktu.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wyciekać płyn – unikać kontaktu z nim. Płyn wyciekający z baterii może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- W przypadku kontaktu skóry, oczu lub błon śluzowych z płynem z baterii należy

natychmiast przemyć i spłukać dotknięte obszary czystą wodą. W razie potrzeby proszę skonsultować się z lekarzem.

- Baterii nie wolno demontować, zwierać ani wrzucać do ognia.
- Nie należy próbować wyjmować baterii z produktu. Produkt zawiera niewymienne baterie.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio w strefę źródeł światła produktu.

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Produkt należy przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni, wysokiej temperatury lub czynników atmosferycznych (np. deszczu).
- Nie używać produktu, jeżeli części z tworzywa sztucznego są pęknięte, połamane lub zdeformowane. Uszkodzone części należy wymieniać tylko na odpowiednie oryginalne części zamienne.

4 Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nieostrożne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innym ostrym przedmiotem

może spowodować uszkodzenie produktu. Opakowanie należy otwierać bardzo ostrożnie.

1. Wyjąć produkt z opakowania.
2. Upewnić się, czy dostarczony produkt jest kompletny (patrz **rys. A**).
3. Sprawdzić, czy produkt lub jego poszczególne części nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie należy korzystać z produktu. Prosimy zwrócić się do działem obsługi klienta.

5 Ładowanie



- Należy w pełni naładować produkt przed pierwszym użyciem i gdy poziom naładowania baterii jest niski. Czas ładowania wynosi ok. 3 godziny.
- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, produkt emituje 5 sygnałów dźwiękowych, a kontrolki świecą na czerwono, po czym produkt automatycznie się wyłącza. Naładować produkt.
- Jeśli produkt jest przechowywany przez dłuższy czas, należy sprawdzać poziom naładowania baterii i regularnie ładować produkt.
- Produkt nie może być używany podczas ładowania.

1. Wyjąć kontroler **4** z uchwytu magnetycznego **3**.
2. Podłączyć mniejszą końcówkę kabla USB do ładowania **10** do gniazda ładowania **8** kontrolera.
3. Aby naładować urządzenie, podłączyć większą końcówkę kabla USB do ładowania do gniazda USB odpowiedniego źródła zasilania USB (nie wchodzi w skład zestawu) (np. adapter ścienny USB, 5 V DC, 1 A).
4. W przypadku używania adaptera ściennego należy podłączyć go do gniazdka elektrycznego.

Lampki kontrolne **6** migają na zielono podczas procesu ładowania. Proces ładowania jest zakończony, gdy lampki kontrolne emitują ciągłe zielone światło.

Jeśli napięcie źródła zasilania USB jest zbyt wysokie, lampki kontrolne zaświecą się szybko na czerwono, a proces ładowania nie rozpocznie się. Używać odpowiedniego źródła zasilania USB.



5. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć adapter ścienny USB od gniazdka elektrycznego i kabel USB do ładowania od gniazda ładowania.
6. Umieścić kontroler z powrotem w uchwycie magnetycznym. Upewnić się, że kontroler jest prawidłowo umieszczony w uchwycie magnetycznym. W przeciwnym razie produkt nie zadziała.

6 Obsługa


OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!


- Używać trybu z niebieskimi diodami LED (tryby F2 i F6) przez maksymalnie 10 minut na stosowanie i maksymalnie 3 stosowania tygodniowo. Z pozostałych trybów można korzystać codziennie od czwartego tygodnia.


6.1 Przygotowanie

1. Przed użyciem produktu należy go w pełni naładować (patrz rozdział „Ładowanie”).
2. Dokładnie umyć i osuszyć szyję i dekolcie. Należy upewnić się, że nie ma na niej makijażu ani zanieczyszczeń, ponieważ może to zmniejszyć ilość światła przenikającego przez skórę.
3. Usiąść lub położyć się i umieścić maskę LED na klatkę piersiową / szyję  na dekolcie tak, aby wygodnie leżała.
4. Zamocować maskę na paskach na szyję  za pomocą zapięć na rzep. Część maski w kształcie serca powinna leżeć na dekolcie. Upewnić się, że produkt ma jak największy kontakt ze skórą.

6.2 Przeprowadzanie sesji

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania , aby włączyć produkt.

Po włączeniu produkt emituje sygnał dźwiękowy, a lampki kontrolne  zaświecą się na biało.

Diody LED  uruchamiają się. Tryb pracy „F1” jest aktywowany domyślnie.

- Nacisnąć kilkakrotnie przycisk wyboru trybu **7**, aby wybrać inny tryb pracy (F1–F7).
Po zmianie trybu pracy produkt emituje krótki sygnał dźwiękowy.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Wybór trybów pracy”.
- Produkt wyłącza się automatycznie po 10 minutach.
Można także w każdej chwili nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć produkt.
Po wyłączeniu produkt emituje 2 krótkie sygnały dźwiękowe.
- Po zakończeniu sesji zdjąć maskę i nałożyć na szyję i dekolt serum i/lub krem na dzień/noc.
- Po użyciu należy dokładnie wyczyścić produkt (patrz rozdział „Czyszczenie”).

6.3 Wybór trybów pracy

- Nacisnąć kilkakrotnie przycisk wyboru trybu **7**, aby przełączać tryby pracy (F1–F7).
- Licznik czasu pracy (10 minut) jest resetowany za każdym razem po przełączeniu na inny tryb pracy.
- Opis trybów pracy:

Tryb	LED	Najbardziej odpowiedni do
F1	Czerwony	Redukuje drobne linie i zmarszczki, stymuluje produkcję kolagenu i pomaga poprawić krążenie krwi.
F2	Niebieski	Zmniejsza zaczerwienienia związane z trądzikiem i niedoskonałości, zapewnia czystsza cerę.
F3	Bursztyn	Poprawia nawilżenie skóry, koi suchą i wrażliwą skórę, a także redukuje pigmentację i zaczerwienienia na skórze.

Tryb	LED	Najbardziej odpowiedni do
F4	Bliska podczerwień + głęboka bliska podczerwień*	Redukuje zmarszczki, wspiera produkcję kolagenu i elastyny, pobudza krążenie krwi poprawiając koloryt i teksturę skóry oraz sprawiając, że jest bardziej sprężysta. I wspiera warstwy skóry poza skórą właściwą.
F5	Czerwony + bliska podczerwień + głęboka bliska podczerwień* (widać kolor czerwony)	Łączy zalety F1 i F4: dla młodziej wyglądającej i napiętej skóry.
F6	Niebieski + czerwony + bliska podczerwień + głęboka bliska podczerwień* (widać kolor fioletowy)	Łączy zalety F1, F2 i F4: wspiera efekt anti-aging i redukuje zaczerwienienia spowodowane trądzikiem oraz drobne niedoskonałości, dzięki czemu skóra wygląda na bardziej witalną, czystsza i bardziej promienną.
F7	Bursztyn + czerwony + bliska podczerwień + głęboka bliska podczerwień* (widać kolor ciemny pomarańczowy)	Łączy zalety F1, F3 i F4: dla ukojonej, młodziej wyglądającej i bardziej napiętej skóry oraz bardziej wyrównanego kolorytu.

* W trybie F4 diody LED **9** nie świecą, ponieważ bliska podczerwień i głęboka bliska podczerwień są niewidoczne. Świecą jednak 2 czerwone diody LED w masce, aby pokazać, że tryb został aktywowany.

7 Harmonogram stosowania

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Używać trybu z niebieskimi diodami LED (tryby F2 i F6) przez maksymalnie 10 minut na stosowanie i maksymalnie 3 stosowania tygodniowo. Z pozostałych trybów można korzystać codziennie od czwartego tygodnia.

Podczas pierwszego użycia produktu należy postępować zgodnie z poniższym harmonogramem:

Pierwszy tydzień	Stosować raz na 3 dni każdorazowo maks. 10 minut
Drugi tydzień	Stosować raz na 2 dni każdorazowo maks. 10 minut
Trzeci tydzień	Stosować raz na 2 dni każdorazowo maks. 10 minut
Czwarty tydzień	Stosować raz dziennie maks. 20 minut

Gdy wyniki będą widoczne, należy dostosować częstotliwość do jednego lub dwóch razy w tygodniu.

8 Czyszczenie

OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć produkt od źródła zasilania.

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, szczotek ze szczecinią metalową, ani ostrych przedmiotów do czyszczenia lub przedmiotów wykonanych z metalu, takich jak noże, twarde szpachle itp.
 - Do czyszczenia nie należy używać gorącej wody.
1. Wyjąć kontroler **4** z uchwyty magnetycznego **3**.
 2. Do wycierania maski LED na klatkę piersiową / szyję **2** użyć wilgotnej szmatki. Następnie wytrzeć ją do sucha suchą szmatką.
 3. Po wyczyszczeniu nałożyć ponownie kontroler na uchwyt magnetyczny.

PL

9 Przechowywanie

Do przechowywania produktu wszystkie części powinny być zupełnie suche.

- Produkt należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt należy przechowywać w torbie do przechowywania **11** w celu zapewnienia najlepszej ochrony.

10 Rozwiązywanie problemów

Problemy mogą być spowodowane nieznacznymi usterkami, które można samodzielnie usunąć. W tym celu należy przestrzegać instrukcji z poniższej tabeli. Jeśli problem nie zostanie w ten sposób rozwiązany, należy zwrócić się do Działu Obsługi Klienta. Nie wolno samodzielnie naprawiać produktu.

Usterka	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Produkt nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnić się, że produkt jest prawidłowo naładowany. • Upewnić się, że produkt nie jest podłączony do źródła zasilania USB. Produkt nie działa podczas ładowania. • Upewnić się, że kontroler 4 jest prawidłowo umieszczony w uchwycie magnetycznym 3.
Produkt się nie ładuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnić się, że kabel USB do ładowania 10 jest prawidłowo podłączony między gniazdem ładowania 8 a źródłem zasilania USB. • Jeśli do ładowania używany jest adapter ścienny USB, należy upewnić się, że jest on zgodny z produktem (5 V DC, 1 A).

II Dane techniczne

Model:	FAC09
Znamionowa moc wejściowa:	5 V === 1 A
Napięcie robocze:	3,7 V
Pojemność akumulatora:	2000 mAh (litowy)
Liczba diod LED:	120
Rodzaj ochrony:	IPX5
Waga:	257 g
Wymiary (dł. × szer. × głęb.):	243,2 × 559,3 × 37,6 mm
Materiał:	silikon (maska) PC (pilot)

PL

12 Utylizacja

12.1 Utylizacja opakowania



Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego kontenera na odpady. Tekturę i karton należy zutylizować razem z makulaturą, folię razem z tworzywem sztucznym.

12.2 Utylizacja produktu

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych państw europejskich, posiadających systemy do segregacji surowców wtórnych)



Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!

Jeśli produkt nie może być już dłużej używane, **należy zutylizować je zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym regionie lub kraju.** W ten

sposób zapewnia się profesjonalną utylizację starych urządzeń i unika negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dlatego urządzenia elektryczne są oznaczone przedstawionym symbolem.

Baterii i akumulatorów nie można wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!



Użytkownik końcowy jest ustawowo zobowiązany do przekazania wszystkich baterii i akumulatorów – niezależnie od tego, czy zawierają one substancje niebezpieczne*, czy nie – do punktu zbiórki w gminie lub do sprzedawcy, aby można je było zutylizować w sposób

przyjazny dla środowiska.

Należy oddać kompletny produkt (w tym akumulator) do punktu zbiórki i upewnić się, że akumulator jest rozładowany!

* oznaczono za pomocą: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

Wskazówka: Aby usunąć akumulator, owinąć kontroler ręcznikiem i rozbić obudowę młotkiem. W celu uniknięcia obrażeń zapewnić zabezpieczenie oczu i dłoni. Należy pamiętać, że usunięcie akumulatora jest nieodwracalne.

13 Informacje gwarancyjne

Ten produkt jest objęty 2-letnią gwarancją zgodnie z regulacjami i przepisami europejskimi. Zakres gwarancji tego produktu jest ograniczony do usterek technicznych spowodowanych wadliwym procesem produkcji. W przypadku chęci wniesienia roszczenia z tytułu gwarancji należy zasięgnąć wskazówek w naszym Dziale Obsługi Klienta. Być może problem może być rozwiązany bez odsyłania produktu do sklepu czy Centrum Serwisowego. Nasz Dział Obsługi Klienta zawsze chętnie służy pomocą!

I4 Obsługa klienta

Dalsze informacje o produktach Silk'n dostępne są na stronie regionalnej Silk'n: www.silkn.eu. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, potrzebna jest naprawa lub nasza pomoc, prosimy zwrócić się do najbliższego Centrum Serwisowego Silk'n. Ten podręcznik użytkownika można pobrać również ze strony www.silkn.eu w formacie PDF.

Numer Serwisu: +31 (0)180-330550

E-mail: info@silkn.eu

2506_002_EU



Silk'n®

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam
The Netherlands

www.silkn.eu • info@silkn.eu

Silk'n UK Ltd.
2nd Floor, De Burgh House
Market Road, Wickford,
Essex, SS12 0FD
United Kingdom



FR

**Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr