

Silk'n®

LED EMS FACE MASK



FAC06



- EN USER MANUAL
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES MANUAL DE USUARIO
- IT MANUALE D'USO
- TR KULLANIM KILAVUZU
- PT MANUAL DO UTILIZADOR

- DA BRUGERMANUAL
- NO BRUKERHÅNDBOK
- SV ANVÄNDARMANUAL
- CS NÁVOD K POUŽITÍ
- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- LT VARTOTOJO VADOVAS
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

EN
DE
FR
NL
ES
IT
TR
PT
DA
NO
SV
CS
PL
LT
HU
RO

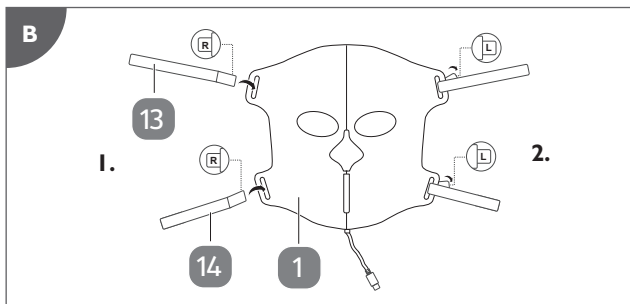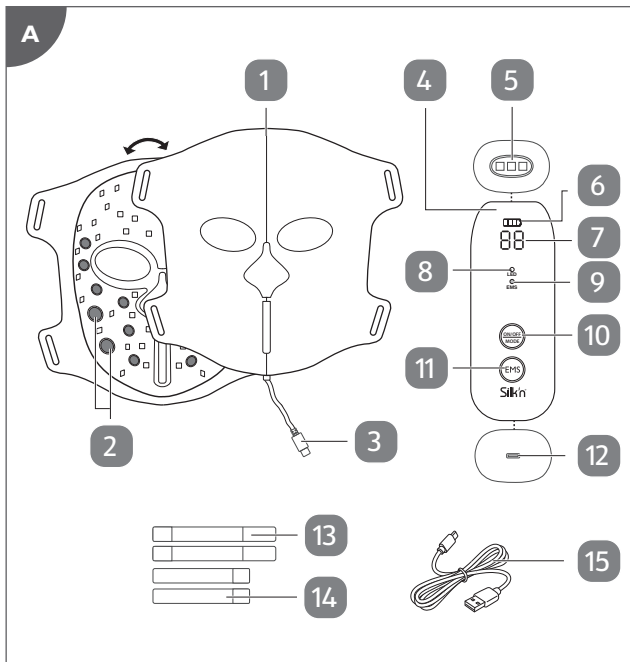

Prawa autorskie 2025 © Silkn Beauty Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacja prawna

Invention Works B.V. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy efektywności, bezpieczeństwa użytkowania lub zdolności produkcyjnych. Informacje udostępnione przez Invention Works B.V. zostają uznane za poprawne i wiarygodne w dniu ich opublikowania. Jednak Invention Works B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Invention Works B.V. nie przyznaje żadnej licencji dorozumianej, wynikającej z patentu lub podlegającej przepisom prawa patentowego.

Żadnej z części niniejszego dokumentu nie wolno w żadnej formie lub elektronicznie czy mechanicznie kopiować lub przekazywać w jakichkolwiek celach bez wyraźnej pisemnej zgody Invention Works B.V.

Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Silkn Beauty Ltd. dysponuje patentami oraz zgłoszeniami patentowymi, znakami towarowymi, prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej, które są przedmiotem tego dokumentu. Udostępnienie niniejszego dokumentu nie oznacza przekazania licencji na patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, o ile nie jest to wyraźnie uregulowane w formie pisemnej umowy przez Silkn Beauty Ltd. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Silk'n i logo Silk'n są zarejestrowanymi znakami towarowymi Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Holandia

www.silkn.eu – info@silkn.eu

PL

Spis treści

1	Zakres dostawy / części urządzenia	192
2	Informacje ogólne	192
2.1	Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej	192
2.2	Objaśnienie symboli	192
3	Bezpieczeństwo	193
3.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	193
3.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	194
4	Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania	197
5	Ładowanie	198
6	Złożenie	199
7	Obsługa	199
7.1	Przeprowadzanie sesji	199
7.2	Wybór trybów obsługi	200
7.3	Funkcja EMS	201
8	Harmonogram stosowania	201
9	Czyszczenie	202
10	Przechowywanie	203
11	Rozwiązywanie problemów	203
12	Dane techniczne	204
13	Utylizacja	204
13.1	Utylizacja opakowania	204
13.2	Utylizacja produktu	204
14	Informacje gwarancyjne	205
15	Obsługa klienta	205

I Zakres dostawy / części urządzenia

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|----------------------------|
| 1 | Maska na twarz | 9 | Lampka kontrolna trybu EMS |
| 2 | Elektrody | 10 | Przycisk |
| 3 | Wtyczka | 11 | Przycisk EMS |
| 4 | Pilot | 12 | Gniazdo ładowania |
| 5 | Niebieskie diody LED | 13 | Długi gumowy pasek, 2× |
| 6 | Wskaźnik poziomu naładowania baterii | 14 | Krótki gumowy pasek, 2× |
| 7 | Wyświetlacz | 15 | Kabel USB do ładowania |
| 8 | Lampka kontrolna trybu LED | | |

2 Informacje ogólne

2.1 Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej



Niniejsza instrukcja obsługi należy do tej LED EMS Face Mask (zwanej dalej „produktem”). Zawiera ona ważne informacje potrzebne do rozpoczęcia użytkowania i obsługi.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności instrukcji bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji obsługi może doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu. Instrukcja obsługi opiera się na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej. Należy również przestrzegać wytycznych i przepisów krajowych. Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi w celu późniejszego wykorzystania. Przekazując produkt osobie trzeciej, koniecznie należy dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

2.2 Objaśnienie symboli

Poniższe symbole i zwroty ostrzegawcze są używane w niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie oraz na opakowaniu.

OSTRZEŻENIE!

Symbol/zwrot ostrzegawczy wskazujący na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które – w przypadku jego zignorowania – może doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet do śmierci.

WSKAZÓWKA!

Zwrot ostrzegawczy ostrzegający przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ten symbol ostrzegawczy sygnalizuje przydatne informacje dodatkowe na temat użytkowania.



Zapoznać się z instrukcją obsługi.



Deklaracja zgodności: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie właściwe przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone jedynie do użytkowania w gospodarstwie domowym (w suchych pomieszczeniach).



Ten symbol wskazuje napięcie i natężenie znamionowe dla prądu stałego.

PL

3 Bezpieczeństwo

3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt został opracowany wyłącznie w celu przywrócenia skóry blasku, elastyczności i struktury. Aktywuje również mięśnie twarzy poprzez EMS (elektryczną stymulację mięśni). Ponadto pomaga zredukować drobne linie, zmarszczki i inne niedoskonałości skóry. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nie zastosowania komercyjnego.

Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Każdy inny sposób wykorzystania produktu uznaje się za niezgodny z przeznaczeniem i może doprowadzić do strat materialnych lub stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe wskutek użytkowania produktu w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

3.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Produkt może być zasilany wyłącznie bezpiecznym, bardzo niskim napięciem, zgodnie z oznaczeniem na produkcie.
- Nie otwierać obudowy i nie wkładać do niej żadnych przedmiotów.
- Do naprawy urządzenia wolno stosować tylko części odpowiadające jego pierwotnym danym. W produkcie znajdują się części elektryczne i mechaniczne nieodzwonne do bezpiecznego użytkowania.
- Produkt może być używany wyłącznie z dołączonym kablem USB do ładowania.
- Nie należy używać produktu ani kabla USB do ładowania, jeśli są one uszkodzone lub wadliwe. Uszkodzone lub wadliwe części muszą zostać wymienione przez producenta lub serwis, aby uniknąć ryzyka.
- Zawsze wyłączać produkt, gdy nie jest używany, w celu wyczyszczenia lub gdy wystąpiła usterka. Zawsze odłączać kabel USB do ładowania, gdy produkt nie jest ładowany.
- Nigdy nie dotykać kabla USB do ładowania wilgotnymi lub mokrymi rękami.

- Nigdy nie transportować, nie ciągnąć ani nie przenosić produktu za kabel USB do ładowania.
- Przechowywać produkt i kabel USB do ładowania z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Kabel USB do ładowania należy poprowadzić w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko potknięcia.
- Nie załamywać kabla USB do ładowania ani nie owijać go wokół produktu. Nie prowadzić kabla USB do ładowania przez ostre krawędzie.
- Nie zanurzać produktu ani kabla USB do ładowania w wodzie lub w innych cieczach. Należy trzymać go z dala od wody.
- Nie używać produktu podczas ładowania.
- Nie należy próbować wyjmować baterii z produktu. Produkt zawiera niewymienne baterie.

**! OSTRZEŻENIE! RYZYKO
ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!**

- Ten produkt nie może być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecz-

nego korzystania z produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci.

- Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, dzieci, osoby z epilepsją, osoby z chorobami tarczycy, osoby przyjmujące leki na tarczycę, osoby z fotoalergią lub osoby przyjmujące leki na alergię na światło.
- Produkt nie może być stosowany w przypadku chorób skóry, ropiejących ran, ran powypadkowych i pooperacyjnych.
- Produktu nie mogą używać osoby posiadające metalowe implanty w twarzy / jamie ustnej.
- Używać niebieskiej diody LED lub trybu EMS przez maksymalnie 10 minut na aplikację i maksymalnie 3 aplikacje tygodniowo.
- W razie wątpliwości co do możliwości stosowania produktu należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu, wystąpienia nietypowych reakcji (np. swędzenia lub nieprzyjemnego stanu zapalnego) lub nieprzyjemnego nagrzania skóry, należy zaprzestać stosowania produktu.

- Nie należy patrzeć bezpośrednio w strefę źródeł światła produktu.
- Dzieci należy trzymać z dala od produktu i kabla USB do ładowania.

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Produkt należy przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni, wysokiej temperatury lub czynników atmosferycznych (np. deszczu).
- Nie zginać ani nie zwijać produktu.
- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na produkcie.
- Nie używać produktu, jeżeli części z tworzywa sztucznego są pęknięte, połamane lub zdeformowane. Uszkodzone części należy wymieniać tylko na odpowiednie oryginalne części zamienne.

4 Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nieostrożne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innym ostrym przedmiotem może spowodować uszkodzenie produktu. Opakowanie należy otwierać bardzo ostrożnie.

1. Wyjąć produkt z opakowania.
2. Upewnić się, czy dostarczony produkt jest kompletny (patrz **rys. A**).
3. Sprawdzić, czy produkt lub jego poszczególne części nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie należy korzystać z produktu. Prosimy zwrócić się do działem obsługi klienta.

5 Ładowanie

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Do ładowania należy używać wyłącznie dostarczonego kabla USB do ładowania.
- Produkt ładować w temperaturze od 0 do 40°C.



- Należy w pełni naładować produkt przed pierwszym użyciem i gdy poziom naładowania baterii jest niski. Czas ładowania wynosi ok. 3,5 godziny.
 - Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik poziomu naładowania baterii **6** miga 5 razy, zanim nastąpi automatyczne wyłączenie. Naładować produkt.
 - Produkt nie może być używany podczas ładowania.
 - Jeśli produkt jest przechowywany przez dłuższy czas, należy sprawdzać poziom naładowania i regularnie ładować baterię.
1. Podłączyć mniejszą końcówkę kabla USB do ładowania **15** do gniazda ładowania **12** produktu pilota **4**.
 2. Aby naładować urządzenie, podłączyć większą końcówkę kabla USB do ładowania do gniazda USB odpowiedniego źródła zasilania USB (nie wchodzi w skład zestawu) (np. zasilacz USB, 5 V DC, 1 A).
 3. Podłączyć zasilacz USB do gniazda zasilania, aby naładować urządzenie.

Wskaźnik poziomu naładowania baterii **6** wskazuje poziom naładowania. Proces ładowania jest zakończony, gdy wszystkie obszary wskaźnika poziomu naładowania baterii emitują ciągłe światło.

4. Po zakończeniu ładowania odłączyć zasilacz USB od gniazda ściennego i kabel USB do ładowania od gniazda ładowania pilota.

6 Złożenie

1. Odpiąć zapięcia na rzepy na gumowych paskach.
2. Przełożyć długie gumowe paski (13) przez górne otwory, a krótkie gumowe paski (14) przez dolne otwory maski na twarz (1) (patrz krok 1 na **rys. B**).
3. Zapiąć zapięcia na rzepy, aby przymocować gumowe paski do maski na twarz (patrz krok 2 na **rys. B**).

7 Obsługa

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Używać niebieskiej diody LED lub trybu EMS przez maksymalnie 10 minut na aplikację i maksymalnie 3 aplikacje tygodniowo.

7.1 Przeprowadzanie sesji

1. Naładować całkowicie produkt i prawidłowo założyć gumowe paski (13)/(14) (patrz rozdział „Ładowanie” i „Złożenie”).
2. Dokładnie umyć i osuszyć twarz i ręce. Upewnić się, że nie znajduje się na nich makijaż ani brud.
3. Usiąść lub położyć się i umieścić maskę na twarz (1) na swojej twarzy.
4. Za pomocą zapięć na rzepy na końcach gumowych pasków założyć maskę tak, aby wygodnie przylegała do twarzy. Zwrócić uwagę na to, aby elektrody (2) miały styczność ze skórą.
5. Połączyć wtyczkę (3) maski na twarz z gniazdem ładowania (12).
6. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (10), aby włączyć produkt. Produkt domyślnie aktywuje funkcję LED po włączeniu. Komunikat „F1” pojawi się na krótko na wyświetlaczu (7) przed rozpoczęciem odliczania czasu (10 minut).
7. Należy, w razie potrzeby, ponownie nacisnąć przycisk, aby wybrać inny tryb obsługi.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Wybór trybów obsługi”.

8. Produkt wyłączy się automatycznie po odliczaniu. Zdjąć maskę na twarz i nałożyć na skórę serum i/lub krem na dzień/noc. Aby wyłączyć produkt w dowolnym momencie, można również nacisnąć i przytrzymać przycisk.

7.2 Wybór trybów obsługi

- W celu przewinięcia trybów obsługi (F1–F4) należy wielokrotnie nacisnąć przycisk **10**.
- Opis trybów obsługi:

	Tryb	Najbardziej odpowiedni do
F1	LED (czerwień, ciemna czerwień, bliska podczerwień i głęboka bliska podczerwień)	Anti-aging: redukuje drobne linie i zmarszczki, odbudowuje włókna kolagenu i elastyny oraz pomaga poprawić mikrokrążenie, zapewniając jędrniejszą i bardziej napiętą skórę.
F2	LED (kolory bursztynowe, ciemna czerwień, bliska podczerwień i głęboka bliska podczerwień)	Zmniejsza przebarwienia i zaczerwienienia, łagodzi skórę i wspomaga produkcję kolagenu, zapewniając bardziej równomierny koloryt i jędrniejszą skórę.
F3	LED (czerwień i ciemna czerwień)	Reguluje wydzielanie sebum na twarzy, łagodzi wrażliwą skórę i zmniejsza zaczerwienienia.
F4	LED (niebieski)	Przyspiesza zanikanie zaczerwienień spowodowanych trądzikiem i zapewnia bardziej równomierny koloryt skóry.

- Lampka kontrolna trybu LED **8** świeci się, gdy funkcja LED jest aktywna.
- Niebieskie diody LED **5** włączają się po wybraniu trybu F4.
- Wybrany tryb obsługi pojawi się na krótko na wyświetlaczu **7** przed rozpoczęciem odliczania czasu (10 minut). Timer jest resetowany po wybraniu innego trybu obsługi.

7.3 Funkcja EMS



Funkcja EMS (elektryczna stymulacja mięśni) generuje mikroprądy, które stymulują ruch mięśni, poprawiają krążenie krwi i wspierają produkcję kolagenu i elastyny.

Aby aktywować funkcję EMS:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk EMS **11**, aby włączyć funkcję EMS. Intensywność jest domyślnie ustawiona na poziom 1. Zostanie ona wyświetlona krótko jako „L1” na wyświetlaczu **7**.

Funkcja EMS działa tylko w trybach LED 1, 2 i 3.

Lampka kontrolna trybu EMS **9** świeci się, gdy wybrano funkcję EMS.

2. Aby przewinąć poziomy mocy EMS (1–8), przyciskać kilkakrotnie przycisk EMS.

Aby uniknąć dyskomfortu, wyższy poziom mocy jest aktywowany dopiero po około 1,5 sekundy od jego wybrania.

Wyświetlacz pokazuje na przemian wybrany poziom intensywności EMS (za pomocą litery „L”), aktualny tryb obsługi (za pomocą litery „F”) i pozostały czas aplikacji.

- Zauważalne będzie, jak lekkie impulsy elektryczne powodują skurcze mięśni twarzy. Należy używać najwyższego poziomu energii, który nadal jest komfortowy dla użytkownika. Należy obniżyć poziom energii, gdy tylko poczuje się dyskomfort.
- Aplikacja odbywa się przez czas trwania wybranego zastosowania LED. Produkt jest automatycznie wyłączany po zakończeniu odliczania. Aby wyłączyć produkt w dowolnym momencie, można również nacisnąć i przytrzymać przycisk.
- Chcąc zatrzymać stosowanie funkcji EMS podczas stosowania LED, nacisnąć i przytrzymać przycisk EMS aż do momentu wyłączenia funkcji EMS.

8 Harmonogram stosowania



OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Używać niebieskiej diody LED lub trybu EMS przez maksymalnie 10 minut na aplikację i maksymalnie 3 aplikacje tygodniowo.

Z pozostałych trybów można korzystać codziennie od czwartego tygodnia.

Podczas pierwszego użycia produktu należy postępować zgodnie z poniższym harmonogramem:

Pierwszy tydzień	Stosować raz na 3 dni każdorazowo maks. 10 minut
Drugi tydzień	Stosować raz na 2 dni każdorazowo maks. 10 minut
Trzeci tydzień	Stosować raz na 2 dni każdorazowo maks. 10 minut
Czwarty tydzień	Stosować raz dziennie maks. 20 minut

Gdy wyniki będą widoczne, należy dostosować częstotliwość do jednego lub dwóch razy w tygodniu.


9 Czystczenie

OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć produkt od źródła zasilania.

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nie stosować agresywnych środków czyszczących (np. octu lub środka do usuwania kamienia), szczotek ze szczecinią metalową lub nylonową, ani ostrych przedmiotów do czyszczenia lub przedmiotów wykonanych z metalu, takich jak noże, twarde szpachelki itp.

- Do czyszczenia nie należy używać gorącej wody.
- Przetrzeć maskę na twarz  wilgotną ściereczką lub specjalną nawilżoną wodą ściereczką do czyszczenia. Następnie wytrzeć ją do sucha suchą szmatką.

10 Przechowywanie

Do przechowywania produktu wszystkie części powinny być zupełnie suche.

- Produkt należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia najlepszej ochrony.

11 Rozwiązywanie problemów

Problemy mogą być spowodowane nieznacznymi usterkami, które można samodzielnie usunąć. W tym celu należy przestrzegać instrukcji z poniższej tabeli. Jeśli problem nie zostanie w ten sposób rozwiązany, należy zwrócić się do Działu Obsługi Klienta. Nie wolno samodzielnie naprawiać produktu.

Usterka	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Produkt nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnić się, że produkt jest prawidłowo naładowany. • Upewnić się, że produkt nie jest podłączony do źródła zasilania USB. Produkt nie działa podczas ładowania.
Produkt się nie ładuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnić się, że kabel USB do ładowania jest prawidłowo podłączony między gniazdem ładowania a źródłem zasilania USB.

12 Dane techniczne

Model:	FAC06
Napięcie znamionowe:	3,7 V
Pojemność akumulatora:	2000 mAh, litowy
Liczba diod LED:	60 (maska na twarz) 3 (pilot)
Łączna ilość żarówek LED:	243
Materiały:	silikon do zastosowań spożywczych, ABS, PC
Waga:	352,4 g
Wymiary (dł. × szer. × głęb.):	235 × 223 × 108 mm

13 Utylizacja

13.1 Utylizacja opakowania



Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego kontenera na odpady. Teksturę i karton należy zutylizować razem z makulaturą, folię razem z tworzywem sztucznym.

PL

13.2 Utylizacja produktu

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych państw europejskich, posiadających systemy do segregacji surowców wtórnych)



Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!

Jeśli produkt nie może być już dłużej używane, **należy zutylizować je zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym regionie lub kraju.** W ten

sposób zapewnia się profesjonalną utylizację zużytych urządzeń i unika negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dlatego urządzenia elektryczne są oznaczone przedstawionym symbolem.

Baterii i akumulatorów nie można wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!



Użytkownik końcowy jest ustawowo zobowiązany do przekazania wszystkich baterii i akumulatorów – niezależnie od tego, czy zawierają one substancje niebezpieczne*, czy nie – do punktu zbiórki w gminie lub do sprzedawcy, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Należy oddać kompletny produkt (w tym akumulator) do punktu zbiórki i upewnić się, że akumulator jest rozładowany!

* oznaczono za pomocą: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

Wskazówka: Aby usunąć akumulator, należy owinąć pilot rącznikiem i rozbić obudowę młotkiem. W celu uniknięcia obrażeń zapewnić zabezpieczenie oczu i dłoni. Należy pamiętać, że usunięcie akumulatora jest nieodwracalne.

14 Informacje gwarancyjne

PL

Ten produkt jest objęty 2-letnią gwarancją zgodnie z regulacjami i przepisami europejskimi. Zakres gwarancji tego produktu jest ograniczony do usterek technicznych spowodowanych wadliwym procesem produkcji. W przypadku chęci wniesienia roszczenia z tytułu gwarancji należy zasięgnąć wskazówek w naszym Dziale Obsługi Klienta. Być może problem może być rozwiązany bez odsyłania produktu do sklepu czy Centrum Serwisowego. Nasz Dział Obsługi Klienta zawsze chętnie służy pomocą!

15 Obsługa klienta

Dalsze informacje o produktach Silk'n dostępne są na stronie regionalnej Silk'n: www.silkn.eu. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, potrzebna jest naprawa lub nasza pomoc, prosimy zwrócić się do najbliższego Centrum Serwisowego Silk'n. Ten podręcznik użytkownika można pobrać również ze strony www.silkn.eu w formacie PDF.

Numer Serwisu: +31(0)180-330550

E-mail: info@silkn.eu



Silk'n®

Invention Works B.V.
Galileistraat 17
3029 AL Rotterdam
The Netherlands

www.silkn.eu • info@silkn.eu

Silk'n UK Ltd.
2nd Floor, De Burgh House,
Market Road
Wickford, Essex, SS12 0FD
United Kingdom



FR

**Cet appareil
et ses cordons
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr